



Prophy-Mate neo NSK Create it

Pour un polissage Supra-Gingival doux
Système de polissage à Air Pulsé



POUR UN POLISSAGE SUPRA-GINGIVAL DOUX

Le polissage supra-gingival est extrêmement efficace lorsqu'il est associé au FLASH pearl. Le dispositif unique de double arrivée d'air assure un flux libre de la poudre directement sur la surface de la dent. La pièce à main longue et fine associée à la buse, améliore grandement l'accès à l'ensemble de la surface dentaire.

Le polissage peut être réalisé rapidement, même pour les dents des zones interproximales et dans les zones habituellement difficiles d'accès.

Confortable et ergonomique, elle permet d'allier travail de précision et liberté de mouvements.

La pièce à main est directement connectée aux raccords standards NSK et est contrôlée à partir de la pédale de l'unit. Il est léger, compact et facile à entretenir. Le dispositif unique de double système d'arrivée d'air assure un flux libre de la poudre de polissage directement sur la surface de la dent. Disponible en buse orientable (360°), détachable, coudées à 60° et 80°



~~1.662€~~

1.120€

+

**Une
deuxième
pièce à main
offerte**



Réf : T797010

**Valeur offerte :
374€**

Garantie 12 mois

Raccords :

	NSK	PMNG-PLT-P	Réf : Y135029
	KAVO	PMNG-KV-P	Réf : Y135030
	Sirona	PMNG-SR-P	Réf : Y135031
	W&H	PMNG-WH-P	Réf : Y135032
	Bien-Air	PMNG-BA-P	Réf : Y135033
	Midwest	PMNG-M4-P	Réf : Y135034
	Borden	PMNG-B2-P	Réf : Y135035




06.73.26.33.28
06.48.46.10.75



dentea@orange.fr

Livré avec 5 sticks de Flash Pearl et 2 buses (60° et 80°)

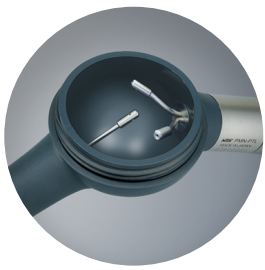

Système à double arrivée d'air

Le double système d'arrivée d'air garantit un brassage et une projection de poudre de manière constante. Grâce au jet puissant, la durée du polissage est nettement raccourcie, ce qui réduit le délai de traitement.



Buses de remplacement interchangeables

Des buses coudées à 60° ou 80° sont disponibles, permettant d'optimiser l'accès aux zones de traitement. La buse à 60° est tout particulièrement indiquée pour traiter la région des molaires, celle à 80° pour les dents antérieures.



Double rotation à 360°

L'instrument est orientable à 360°. La connexion de la pièce à main a été élaborée pour pivoter librement même en cas de pression élevée.



Connexion simple et rapide

Le Prophy-Mate neo peut se connecter facilement sur tous les raccords existants. La pièce à main peut également être fixée au compartiment à poudre grâce à un raccord rapide.



Poudre Flash Pearl :

Cette poudre non agressive permet d'obtenir des résultats remarquables en matière de polissage. Dotée d'une saveur délicate, la poudre ne laisse pas d'arrière-goût et le patient bénéficie d'un nettoyage non agressif de la surface des dents. Le secret de ce polissage en profondeur et en douceur ? Des particules sphériques à base de calcium. Cette poudre extrêmement fine est constituée de particules d'une taille moyenne de 54 µm qui roulent sur la surface de la dent, sans l'abuser, et éliminent rapidement la plaque dentaire et les taches.

Le produit ne contient pas de sel mais des ingrédients doux


La poudre étant composée à 94% de carbonate de calcium, le goût n'est pas désagréable pour le patient puisqu'il n'est pas salé. Il est donc tout à fait adapté aux patients ayant un régime hyposodé.


Les risques d'obstruction sont également minimes

Les fines particules de poudre ne se dissolvant pas aisément dans l'eau, le risque d'obstruction est réduit. L'entretien du matériel est facile puisqu'il y a moins de dépôts de poudre dans les instruments.



Bouteille 4x300 g - Réf : Y900698

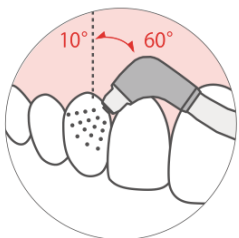

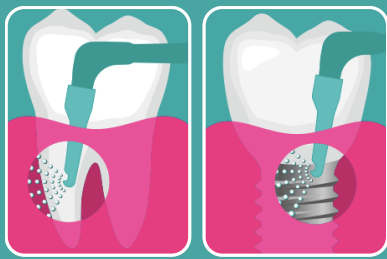

Perio-Mate **NSK**

Create it ▲

Traitement Sous-Gingival

Élimination du biofilm dans la poche parodontale, de 3 à 6 mm sous le rebord gingival.

DES SOINS PROFESSIONNELS EFFICACES ET DOUX POUR LES DENTS.

Les pièces à main Perio-Mate sont utilisées pour le traitement des poches parodontales et des péri-implantites.






Au cours des interventions de nettoyage, il est essentiel d'éviter les lésions au niveau des tissus mous et des surfaces radiculaires à l'intérieur des poches parodontales.

Le pulvérisateur d'eau ultrafin du Perio-Mate et la poudre Perio-Mate à base de glycine s'associent afin de supprimer en douceur le biofilm des poches parodontales en seulement 20 secondes.

Grâce à des années d'expérience dans l'analyse de la dynamique des fluides acquise dans le développement de la technologie des turbines, NSK a conçu une méthode de pression de pulvérisation sûre et extrêmement efficace permettant une élimination rapide et précise du biofilm présent dans les régions sous-gingivales.

En utilisant l'insert plastique Perio-Mate, vous pouvez intervenir sur la zone qui doit être le plus fréquemment traitée : la zone sous-gingivale, jusqu'à 3 mm en-dessous du collet. En outre, vous bénéficiez d'un réglage du débit de poudre qui permet de l'adapter aux conditions de l'intervention. Ainsi, vous pouvez pratiquer tous traitements, du retrait rapide et précis du biofilm au retrait en douceur de ce dernier, autour des implants et dans les poches parodontales.

Raccords :

	NSK	PER-PLT-P	Réf: Y1002654
	KAVO	PER-KV-P	Réf: Y1002655
	Sirona	PER-SR-P	Réf: Y1002656
	W&H	PER-WH-P	Réf: Y1002657
	Bien-Air	PER-BA-P	Réf: Y1002658
	Midwest	PER-M4-P	Réf: Y1002659
	Borden	PER-B2-P	Réf: Y1002660

Livré avec 1 flacon de poudre de 160 gr et 40 embouts jetables



~~1.565€~~

1.120€

+

Une

deuxième

pièce à main

offerte

Réf : T1043010

Valeur offerte :

374€




06.73.26.33.28
06.48.46.10.75



dentea@orange.fr

Garantie 12 mois

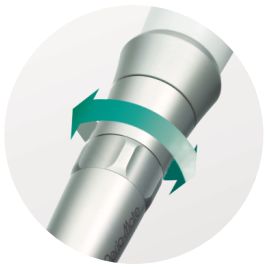


Réglage du débit/volume de poudre

L'anneau de contrôle du débit de poudre du Perio-Mate simplifie et rend intuitif le réglage minutieux grâce à des ajustements rapides du bout des doigts. Vous pouvez délicatement et efficacement retirer le biofilm et traiter les péri-implantites même situées dans des poches parodontales sensibles. En plus d'un contrôle et d'un arrêt aisés du débit de poudre, vous pouvez éliminer le biofilm sans interruption.



Une rotation à 360° pour des interventions sûres et efficaces

La pièce à main peut être facilement orientée du bout des doigts même au cours d'interventions complexes. La buse permet également un meilleur accès aux régions difficiles à atteindre, et n'affecte ni les dents ni les tissus mous avoisinants.

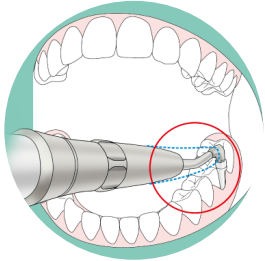

Accessibilité optimale

Même dans les espaces étroits de la cavité buccale, la buse du Perio-Mate permet de couvrir une plus grande surface de travail tout en assurant une visibilité excellente et des interventions sous-gingivales simplifiées. La forme allongée de la buse est conçue pour permettre un accès aisé même dans des zones particulièrement difficiles.



Entretien

L'utilisateur peut aisément démonter la buse, la pièce à main et le réservoir contenant la poudre. Si l'appareil est entretenu et utilisé correctement, il est peu probable qu'un encrassement dû à la poudre survienne. Si cela se produit malgré tout, le problème est facile à résoudre en suivant les directives de maintenance et grâce aux accessoires spécifiques fournis avec l'appareil. A part l'embout plastique, tous les éléments qui composent la pièce à main peuvent être nettoyés par ultrasons et stérilisés en autoclave aussi souvent que nécessaire.



Des inserts inédits

Le design de l'insert NSK est constitué d'un matériau semi-transparent améliorant la visibilité pendant les interventions. Les inserts à usage unique offrent une facilité d'utilisation et une sécurité plus grande.

Inserts plastiques PERIO : Usage unique, stériles, emballés individuellement.



40 embouts - Réf Y1002741

Poudre PERIO MATE : Poudre de polissage sous-gingival. Le principal composant est la glycine. Non aromatisé. Sans sodium. Dureté basse selon l'échelle de Mohs par rapport à la dureté de la dentine. Glycine de dureté 2 sur l'échelle de Mohs, tandis que la dentine est de 2 à 2,5. Les particules présentent un diamètre moyen de 25 µm. 0gr et 40 embouts jetables.



2 flacons par boîte (2 x 160 g) Réf Y900938