

# OFFRE EXCLUSIVE DENTEA

Valable jusqu'au 30 juin

1

INSTRUMENT  
DE LA GAMME  
Ti-Max Z

+

4

ANS

DE GARANTIE



= 1.000€

# NOUVEAU

Deux innovations techniques :

- ① Forte augmentation de couple.
- ② Fonction d'arrêt rapide : Quick Stop.

## Une puissance sans précédent

Z990L  **44W**

Z890L  41W




### Équilibre parfait entre performance, sécurité, confort et ergonomie

Sensation de découpe révolutionnaire et une puissance augmentée : de **26W à 44W**.

Cette augmentation de coupe est très efficace pour travailler sur des **matériaux extrêmement durs tels que la zircone**. Temps de travail plus court et donc moins stressant et moins fatiguant pour le patient et le professionnel.

#### Tête standard :

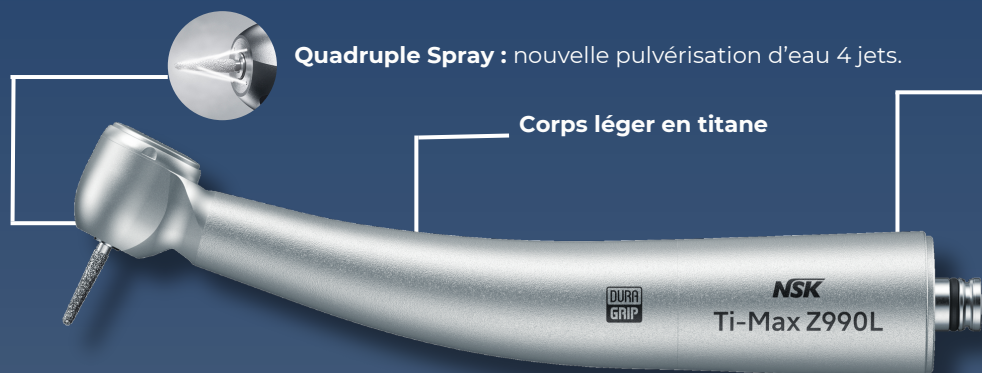

**Quadruple Spray** : nouvelle pulvérisation d'eau 4 jets.

Corps léger en titane


Z990L

Puissance : 44 W  
Vitesse : 280 000 - 360 000 min/1  
Taille de la tête : Ø 12,1 x H 12,7 mm

~~1.884€~~ **1.120€**

Raccords disponibles :  
NSK, Bien-Air, W&H, Kavo, Sirona

#### Tête mini :

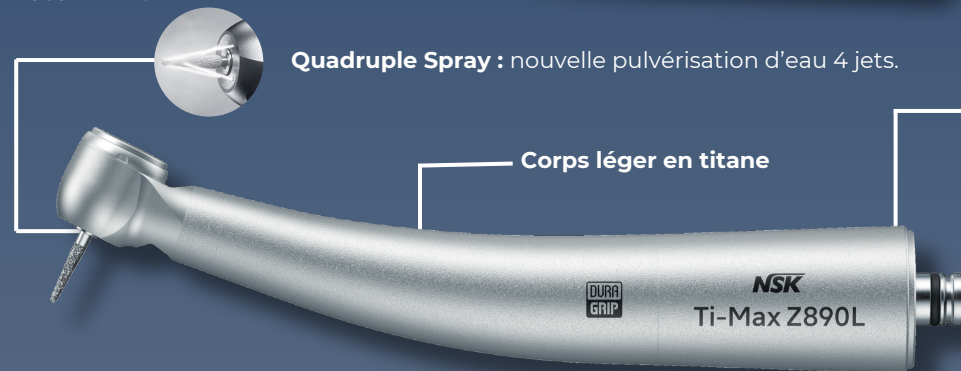

**Quadruple Spray** : nouvelle pulvérisation d'eau 4 jets.

Corps léger en titane

Z890L

Puissance : 41 W  
Vitesse : 320 000 - 400 000 min/1  
Taille de la tête : Ø 10,6 x H 10,8 mm


~~1.884€~~ **1.120€**

Raccords disponibles :  
NSK, Bien-Air, W&H, Kavo, Sirona



#### INNOVATION QUICK STOP : ARRÊT RAPIDE DU ROTOR EN 1 SECONDE

La fonction Quick Stop, qui arrête la rotation à grande vitesse en environ 1 seconde, est montée à l'avant et à l'arrière de la tête. La fonction Quick Stop permet un arrêt rapide pour empêcher la rotation inertielle et réduire le risque de coincement intra-oral et de ré-aspiration, assurant ainsi un traitement bien plus sûr.

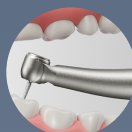

#### TÊTE INCLINÉE POUR UN ACCÈS FAVORISER :

La tête inclinée à 100° au lieu de 94° facilite l'accès aux zones postérieures.



#### DURAPOWER CHUCK : Nouveau mécanisme de mandrin avec une force de maintien exceptionnelle

Offre une force de préhension plus soutenue pour réduire le risque de dérapage de la fraise par rapport au modèle conventionnel.



**REVÊTEMENT DURAGRIP** : Traitement de surface anti-dérapant et anti-rayure. Améliore la longévité de l'instrument et assure une prise en main confortable et optimale.

Turbine

**Ti-Max Z micro**  Garantie 24 mois



**NSK**  
Create it

## Tête mini - Puissance maxi



**Mini tête très puissante 20W et orientée à 100° :**

Accessibilité optimale en postérieur.



**Accès aisé grâce à l'orientation de la tête :**


L'utilisation est facilitée et l'accès simplifié lors des soins dans le secteur postérieur, sans aucun contact avec les dents antérieures.



**Fonction Quick Stop : Arrêt rapide du rotor en 1 seconde**

La fonction Quick Stop **interrompt la rotation à haute vitesse en une seconde environ.**

L'arrêt immédiat de la fraise est un gage de sécurité renforcée qui permet une découpe efficace à grande vitesse et garantit la sûreté de fonctionnement.

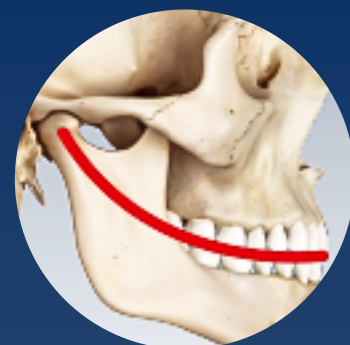


### Le petit devient grand avec la turbine Ti-Max Z micro.

Sa mini-tête de **9,0mm de diamètre** produit une **puissance extraordinaire de 20W**, tandis que **l'orientation à 100°** de la tête optimise l'utilisation et permet l'accès aux zones postérieures. Les remontées de fluide indésirables sont évitées grâce au système Clean Head. Le nouveau système **Quick Stop** garantit quant à lui **la sécurité du patient**.

**Z micro : Ø9,0 x H 10,8 mm**

Z800L : Ø10,8 x H 12,1 mm

**Corps léger en titane :**  
moins de 40g

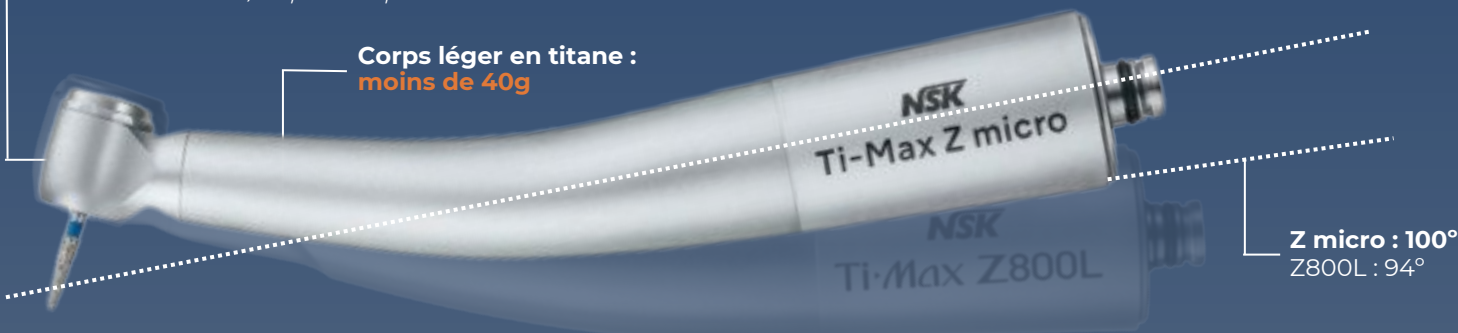

**Z micro : 100°**  
Z800L : 94°

**Z micro :** Puissance 20W - Vitesse 380 000-450 000 tr/min

 **Conditionnement :** Raccords disponibles : NSK Réf PA2357 - Kavo Réf PA2358 - Sirona Réf PA2359

~~1.737€~~ **1.065€**



**Corps léger en titane de moins de 40g**

La légèreté de la turbine réduit la charge au niveau de la main lors des traitements, sa solidité renforcée améliore également sa résistance aux passages en autoclave. Seule la partie externe de la turbine est en titane.



**Quadruple Spray :**

Le quadruple spray NSK refroidit la totalité de la fraise, évitant ainsi tout risque d'échauffement.



**Système Clean Head**

Le mécanisme anti-retour Clean Head réduit considérablement la remontée des fluides dans la turbine.



**Revêtement DURAGRIP**

La nouvelle technologie de revêtement DURAGRIP a été appliquée sur la surface en titane de l'instrument. En plus de sa longévité exceptionnelle, elle assure une prise en main confortable et sûre avec tous types de gants.

# NOUVEAU

## Un modèle haut de gamme intégrant une technologie de pointe

Une première mondiale : 2 types de spray pour la pulvérisation de l'eau

Quadruple spray (avec 2 types de sprays). La première fonction de pulvérisation au monde vous permet de **choisir instantanément entre un spray brumisateur ou un jet**. Sélectionner directement l'option souhaitée selon les conditions et la procédure en cours. Le jet d'eau empêche l'emphysème sous-cutané dans les procédures chirurgicales tout en refroidissant encore pendant les procédures de restauration. Lorsque le spray brumisateur peut être réutilisé sans restriction, il suffit de switcher à nouveau. Aucune modification d'équipement requise.

PROFILÉ, SILENCIEUX, ERGONOMIQUE, LONGÉVITÉ



Tête étroite pour une meilleure accessibilité

**Z95L**

Multiplicateur 1:5  
200.000 tour/min  
Réf : C1034

1.935€ **1.220€**



### Corps léger en titane

La légèreté du contre-angle réduit la charge au niveau de la main lors des traitements, sa solidité renforcée améliore également sa résistance aux passages en autoclave. Seule la partie externe de la turbine est en titane.



### Système Clean Head

Le système Clean Head de NSK est un mécanisme spécialement conçu pour empêcher la remontée des fluides et d'autres organismes infectieux dans la tête du contre-angle, prolongeant ainsi la durée de vie des instruments et assurant un niveau d'hygiène maximal lors du soin.




### Revêtement DURAGRIP

La nouvelle technologie de revêtement DURAGRIP a été appliquée sur la surface en titane de l'instrument. En plus de sa longévité exceptionnelle, elle assure une prise en main confortable et sûre avec tous types de gants.



### Système antichauffe

Le design unique du bouton poussoir NSK aide à limiter la génération de la chaleur pendant le traitement. NSK accorde toujours la priorité à la sécurité du patient (Z95L / Z85L / Z84L).

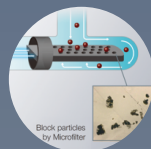

### Microfiltre

Le micro-filtre maintient les contaminants hors du système de pulvérisation d'eau, ce qui réduit considérablement les agglomérats et facilite le nettoyage.



### Longévité

Engrenage carbone et diamant.