

* La gamme SOPIX


UNE IMAGE DE QUALITÉ DÈS LE PREMIER CLICHÉ AVEC UN TEMPS D'EXPOSITION MINIMAL



Équipés de la technologie ACE®, les capteurs de la gamme SOPIX® vous procurent à chaque fois une image de qualité.

Un contraste saisissant pour un diagnostic plus fiable

Grâce à la technologie FIBER2PIXEL® présente dans tous les capteurs de la gamme SOPIX, les **différentes structures anatomiques** telles que l'os, les racines, la pulpe, apparaissent avec **grande précision** sur l'image.

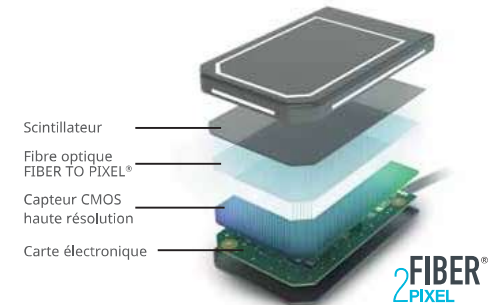

Un design bien pensé pour un plus grand confort

Deux tailles sont disponibles selon la **morphologie du patient** et les **applications cliniques**. Les **bords et coins arrondis** permettent un meilleur confort en bouche du patient, tandis que les **bandes blanches latérales** assurent un meilleur positionnement du capteur en bouche.

Echelle 1



Taille 2

La fin des clichés surexposés

Disponible sur tous les capteurs de la gamme SOPIX®, la technologie ACE® arrête l'acquisition de l'image **protégeant ainsi les clichés d'une surexposition**.

Obtenez une image de qualité dès le premier cliché !



Taille 1

Endodontie



Parodontie



Implantologie



Périapical



THE SOPIX SERIES*

CAPTEURS DE RADIOLOGIE NUMÉRIQUES
SOPIX INSIDE & SOPIX² INSIDE

* La gamme SOPIX

L'ARRÊT DES DOSES EXCESSIVES



Le patient est protégé contre toute exposition inutile aux rayons X grâce à la communication unique entre X-Mind[®] unity et SOPIX[®] inside.




WINDOWS[®]
COMPATIBLE

Le capteur SOPIX[®] inside s'intègre directement dans le bras du générateur X-Mind[®] unity et place la protection du patient au plus haut niveau.

Une protection efficace avec un temps d'exposition minimal

Le patient reçoit uniquement la dose nécessaire, adaptée à sa morphologie. Il est protégé d'une **surexposition inutile**.

Une fois que SOPIX[®] inside a reçu l'énergie nécessaire pour obtenir une **image de qualité**, il envoie l'information au X-Mind[®] unity qui **stoppe l'émission de rayons X**.

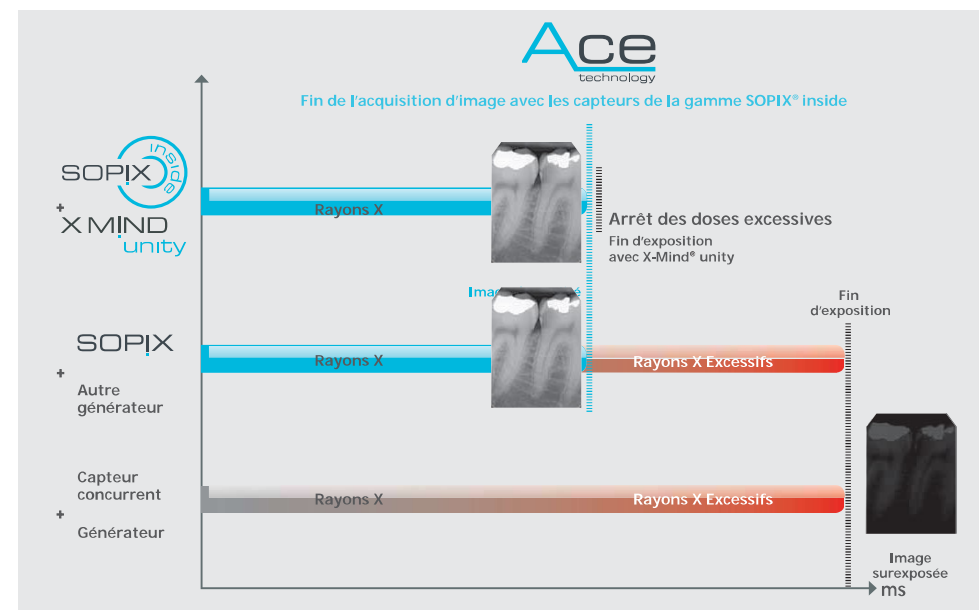

Une traçabilité inégalée

SOPRO Imaging sauvegarde, pour chaque image, les paramètres du générateur X-Mind unity ainsi que la dose effective reçue par le patient.

Un confort de travail incomparable

Les câbles de liaison du capteur SOPIX[®] inside sont intégrés dans le bras du générateur X-Mind unity. Le capteur, à portée de main sur son support, est à l'abri de tout risque de chute.