

Endodontie • Endodontics • Endodontie



802L (494)

Rund, mit Ansatz lang
Long Round with Collar
Ronde long avec extension



Größe/Size/taille $\varnothing \frac{1}{10}$ mm	013	016	021
Länge - Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0

Shank ISO  REF 
FG 806 314 494 524... 802L- ... M-FG 013 016 021

Opt. 013 - 016 = 120.000 rpm, 021 = opt. 160.000 rpm

Diamantkugel mit angesetztem Hals zum Eröffnen und Erweitern der Pulpakammer. Der lange diamantierte Instrumentenhals vereinfacht die Herstellung einer großen Zugangsöffnung für die Wurzelbehandlung. Die mittlere Diamantkörnung unterstützt zügiges Arbeiten bei gleichzeitiger Schonung der Zahnsubstanz.

Round diamond instrument with a diamond-coated neck for opening and expanding the pulp chamber.

The long, diamond-coated instrument neck facilitates preparation of a large opening to provide access for root treatment.


The medium diamond grit size ensures quick, yet minimally invasive preparation.



Fraise boule diamantée avec un cou monté pour l'ouverture et l'élargissement de la chambre pulaire.

Le long cou diamanté facilite la réalisation d'une grande cavité d'accès pour le traitement de la racine. Le grain de diamant moyen permet de travailler rapidement tout en préservant les tissus dentaires.

Endo Access Kit

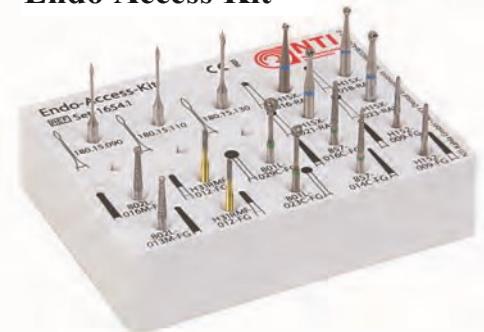

REF SET-1654.1

Seite / page / page 9.20 - 9.21



H152 (210)

Konisch, extra lang
Conical, extra long
Cône, extra long

Größe/Size/taille $\varnothing \frac{1}{10}$ mm

Länge - Length in mm - longueur

Shank ISO  REF 
FG 500 314 210 295... H152 - ... -FG 009

FGL 500 315 210 295... H152 - ... -FGL 009

Opt. 120.000 rpm



REF H152-009-TG

Endodontie • Endodontics • Endodontie

H1SNL Müllerbohrer Endo

Hartmetallbohrer für Endodontie

Die Müller-Kugel für die endodontische Behandlung von Wurzelkanälen. Die kleinen Durchmesser erlauben selbst bei grazilen Frontzähnen das Auffinden, die Eröffnung und Erweiterung von Wurzelkanälen. Der längere schlanke Hals erlaubt das sichere Auffinden von Kanälen ohne die Sicht zu behindern, besonders unter dem Endodontie Mikroskop. Die Schneidengeometrie wurde besonders schnittfreudig gestaltet. Dies vereinfacht das Abtragen auch von verhärtetem Dentin.

Tungsten carbide burs for endodontics

The round Müller carbide burs for the endodontic treatment of root canals. The small diameters enable the root canals of even the most gracile anterior teeth to be located, opened and extended. The longer slim neck allows the canals to be reliably located without restricting the view, particularly under the endodontic microscope.

The cutting geometry has been especially designed to make cutting more pleasurable. This makes the removal of even hardened dentin easier.

Foret de Müller HISNL Endo

Fraises en carbure de tungstène pour les traitements endodontiques
La boule de Müller pour le traitement endodontique de canaux radiculaires.
Les faibles diamètres permettent de localiser, d'ouvrir et d'élargir les canaux radiculaires, et ce même lorsque les dents antérieures sont fines.

Le long cou étroit permet de localiser efficacement les canaux sans obstruer la vue notamment en cas d'utilisation de microscopes endodontiques.

Les lames ont été conçues de manière à obtenir une forme particulièrement coupante qui simplifie le détartrage de la dentine dure.

H1SNL (001)

Rund, langer Hals
Round, Slim Neck
Rond tige allongé



Größe/Size/taille ø 1/10 mm

006	008	010	012
0,6	0,8	1,0	1,2

Länge- Length in mm - longueur



Shank ISO REF

RAXL 500 206 001 003... H1SNL- ... -RAXL 006 008 010 012

⌚ opt. 1.500 - 2.000 rpm

Endobohrer Hartmetall • Carbide burs for the endodontic treatment

Fraises en carbure de tungstène pour les traitements endodontiques

H1SEB (004)

Rund, langer Hals
Round, slim Neck
Rond tige allongé



Größe/Size/taille ø 1/10 mm

004	006	008	010	012	014
0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4

Länge- Length in mm - longueur

Shank ISO REF

RAL 500 205 004 006... H1SEB- ... -RAL 004 006 008 010 012 014

RAXL 500 206 004 006... H1SEB- ... -RAXL 004 006 008 010 012 014

⌚ opt. 1.500 rpm

H269GK (219)

Endo



Größe/Size/taille ø 1/10 mm

016
9,0

Länge- Length in mm - longueur

Shank ISO REF

FGXL 500 316 219 295... H269GK- ... -FGXL 016

⌚ opt. 75.000 rpm

H560 (196)

Endo



Größe/Size/taille ø 1/10 mm

008
4,0

Länge- Length in mm - longueur

Shank ISO REF

FGXXL 500 317 196 336... H560- ... -FGXXL 008

⌚ opt. 100.000 rpm