

hurrimix²



Zhermack 
Dental

Hurrimix² une machine dont on **ne peut pas se passer**





Augmenter l'efficacité du cabinet signifie augmenter le **degré de satisfaction** des patients.

Il est fondamental que l'empreinte présente toutes les informations, précises et claires, nécessaires pour traiter au mieux chaque cas clinique. C'est la raison pour laquelle un bon matériau est indispensable, mais un **mélange de qualité** est très souvent le facteur discriminant entre une bonne et une mauvaise empreinte.

Bien mélanger permet de pouvoir être tranquille que **la première empreinte soit également la définitive**.

Mélanger rapidement permet de pouvoir approcher le patient avec le temps juste à disposition, sans gaspiller cette ressource précieuse pour les professionnelles de l'étude et même les patients.

Hurrimix² est la solution de Zhermack qui augmente **la qualité du mélange et de l'empreinte** : une machine qui lorsqu'on commence à l'utiliser, on comprend vite qu'on ne peut plus s'en passer.



constant rapide fiable efficace

Qualité

de mélange



Hurrimix² a été conçue pour faire en sorte que **la qualité du mélange soit élevée et optimale**. C'est la raison pour laquelle chaque détail a son rôle pour réaliser ce but :

- La rotation doit être le plus possible **constant et rapide** : un **encodeur électronique** est utilisé pour contrôler la vitesse de rotation du matériau à tout moment
- La phase de freinage est également importante : contrôler la décélération **augmente la qualité du mélange** puisqu'elle réduit la formation de bulles
- La possibilité d'avoir jusqu'à **20 programmes optimisés** garantit un mélange parfait de chaque matériau spécifique

Avec Hurrimix² le mélange devient :


- **Rapide** : gain de temps à dédier au patient pour prendre l'empreinte (de 6 à 10 secondes de mélange*)
- **Une qualité constante**: et ne dépend pas de qui effectue l'opération : temps de travail assurés et amélioration du synchronisme entre le dentiste et l'assistant

Après l’empreinte,
que faire ?

Alginate et Plâtres applications différentes, même machine !

QU’EST-CE QUI CHANGE AVEC HURRIMIX² ?

Par rapport à une opération manuelle, Hurrimix² améliore la qualité du mélange, en réduisant considérablement la présence de bulles à l’intérieur du matériau à utiliser pour l’empreinte.

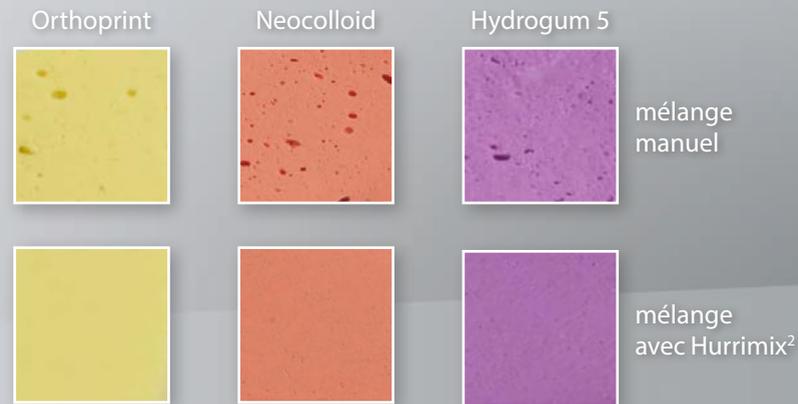

Souvent il-y-a le besoin d’avoir à disposition le modèle directement au cabinet peu de temps après la prise de l’empreinte. c’est possible avec Hurrimix² : les typologies de plâtres Zhermack peuvent être mélangés en quelques secondes :

il est possible de **couler directement le modèle dans au cabinet**, en raccourcissant le temps de travail nécessaire pour certains cas.

- il est possible **d’économiser du temps et des coûts**



constant rapide fiable efficace

Parce qu'il est important que le mélange soit de qualité ?

Bien mélanger permet de pouvoir **enregistrer toutes les informations** qui doivent être relevées dans une empreinte et en utilisant les caractéristiques qu'un matériau offre en termes d'**élasticité, de précision, de résistance**.

Bien souvent la présence des bulles ne permet pas de reproduire les détails correctement et modifie les caractéristiques mécaniques du matériau.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

Le cas clinique, avec une empreinte bien faite, s'avère plus **simple à étudier** et **les erreurs de communication sont réduites d'une façon drastique** avec le prothésiste de confiance.

Pas besoin de demander au patient de revenir ou de refaire l'empreinte. Cela signifie rendre les patients **plus satisfaits et contents**.

De plus, cela permet de réduire les déchets : moins de matériau utilisé, moins de temps perdu par les professionnels et par le patient, plus d'efficacité avec le prothésiste. **Moins de gaspillage signifie un plus grand rendement.**

Mot d'ordre : simplifier !



Hurrimix² s'adapte aux exigences des professionnels, **en simplifiant**.

10 programmes sélectionnables en un seul clic, pour s'adapter aux exigences d'utilisation de chaque professionnel : **temps et caractéristiques de mélange optimisés** pour obtenir la bonne qualité.

De ces 10 programmes*, 7 sont **pré-configurés** sur les produits Zhermack et 3 entièrement libres et **personnalisables** permettant d'adapter les fonctionnalités d'Hurrimix² à des matériaux différents.

Hurrimix² est équipé d'une série d'accessoires pour aider le professionnel pendant le processus de mélange :

- **Bouteille doseuse** : la juste quantité d'eau avec la juste quantité de poudre rendent le produit correctement préparé
- **Conteneurs dédiés** (différents pour les alginates et les plâtres) avec un profil courbé qui s'adapte au profil de la spatule (moins de déchet et une plus grande facilité dans la récolte du matériau)

EMPOWER YOUR
impression




- A Dosage des poudres
- B Dosage de l'eau
- C Mélange
- D Produit prêt à l'emploi



constant rapide fiable efficace

Pensée pour le cabinet, dans chaque **détail**

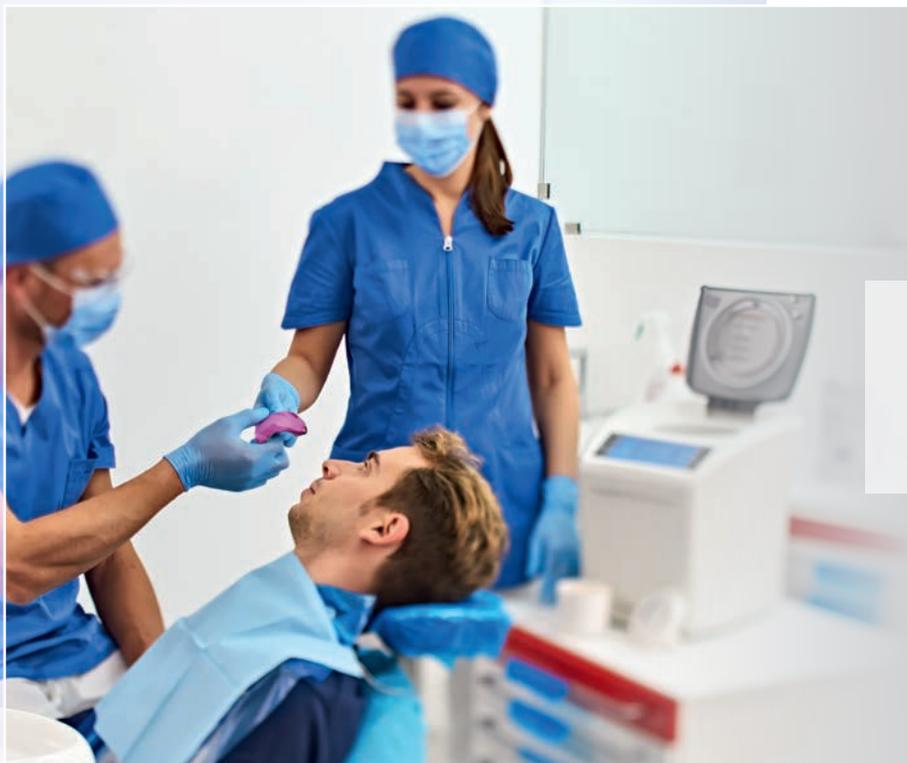

Design moderne, propre, rigoureux et fonctionnel.

Esthétique qui s'adapte bien aux exigences.

COMPOSANTS ÉTUDIÉS POUR GARANTIR UNE LONGUE DURÉE :

- A **Engrenages en acier et bronze** pour une durée supérieure par rapport à ceux en plastique
- B Hurrimix² avertit lorsqu'il est temps d'effectuer l'**entretien préventif** de sorte de diminuer les risques de fonctionnement
- C **Fermeture de sécurité** du couvercle pour éviter les incidents dangereux



A



B



C

GARANTIE ÉTENDUE
À 4 ANS OU À 4 000 CYCLES

constant rapide fiable efficace

Caractéristiques

techniques

Le matériau de la coque externe est un technopolymère

(Polytéréphthalate de butylène - PBT)

DÉSINFECTION : PAS DE PROBLÈME !

Les caractéristiques de résistance aux agents chimiques du PBT permettent une désinfection sans problème de la machine*

MATÉRIAU AUTO-EXTINGUIBLE (UL 94-CLASS.V0)

SÛR ET DURABLE

Les propriétés mécaniques du matériau assurent la résistance nécessaire aux chocs de la machine pendant l'utilisation normale dans le cabinet.



CONTENEURS DE MÉLANGE SANS PHTALATES : UNE SÉCURITÉ POUR LE PATIENT ET LE PROFESSIONNEL.

*Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool



Données techniques

Code Modèle	Dimension	Poids	Tension de réseau	Puissance absorbée max
C305140 Hurrimix ² 230 V	Hauteur 31 cm	21 kg	230 V 50/60 Hz	550 Va (W)
C305141 Hurrimix ² 115 V	Largeur 27 cm Profondeur 32 cm		115 V 50/60 Hz	

Accessoires

Code	Accessoires		
XR0250820	Kit spatule de récolte	XR0250800	Bol pour mélange alginates 2 pces
XR0250830	Bâton pré-mélange	XR0250810	Bol pour mélange plâtres Zhermack 2 pces
		XR0250840	Bouteille dosage eau avec mesure

Produits relatifs

Code	Description		
C302120	Hydrocolor 5, sachet de 453 g	C300900	Kit de mesures Hydrogum 5 / Hydrocolor 5
C302070	Hydrogum 5, sachet de 453 g	C300910	Kit de mesures alginates, à l'exception d'Hydrogum 5 / Hydrocolor 5
C302025	Hydrogum, sachet de 500 g	C300960	Sachet minigrip de conservation d'empreinte, 100 pièces.
C302240	Tropicalgin, sachet de 453 g		
C302086	Phase Plus, sachet de 453 g		
C302145	Orthoprint, sachet de 500 g		
C302205	Neocolloid, sachet de 500 g		

constant rapide fiable efficace



Fulfilling your needs

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack 