
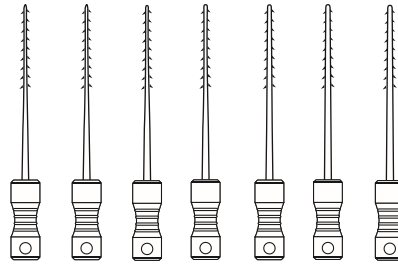


Endodontie Stahlinstrumente • Endodontics steel instruments • Instruments endodontiques en acier

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire



9107 ... 
Nervnadeln
Barbed broaches
Tire - nerfs



Größe / Size / taille ϕ 1/100 mm


020	025	030	035	040	050	060
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Shank	ISO	REF													
654	L=11	340 654 657 455 ...	9107.11.654. ...	6	020	025	030	035	040	050	060				
(1 piece each)	Assortment	9107.11.654.SO1	1		025	030	035	040	050	060					

Die Nervnadel in den Wurzelkanal einführen und nach einer Drehung von 180° bis 360° mit dem umwickelten Pulpagewebe herausziehen.
Manual preparation: insert the broach into the root canal and withdraw the engaged pulp by turning it from 180° to 360°.

Préparation manuelle: insérer le tire - nerf dans le canal radiculaire et retirer l'instrument enveloppé de la pulpe après avoir effectué une rotation de 180° à 360°.



171 ... 
K-Bohrer
K reamers
Broche K

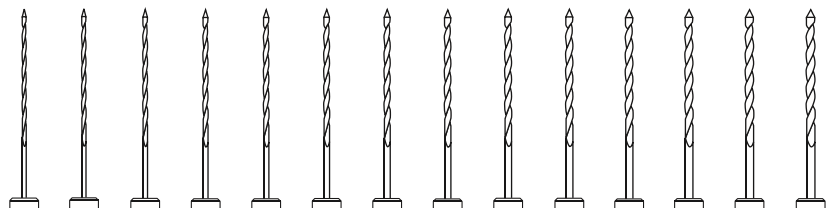

Größe / Size / taille ϕ 1/100 mm

008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Shank	ISO	REF																
654	L=21	340 654 639 451 ...	171.21.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
(1 piece each)	Assortment	171.21.654.SO1	1				015	020	025	030	035	040						
	Assortment	171.21.654.SO2	1										045	050	055	060	070	080
654	L=25	340 654 640 451 ...	171.25.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
(1 piece each)	Assortment	171.25.654.SO1	1				015	020	025	030	035	040						
	Assortment	171.25.654.SO2	1										045	050	055	060	070	080
654	L=28	340 654 641 451 ...	171.28.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
(1 piece each)	Assortment	171.28.654.SO1	1				015	020	025	030	035	040						
	Assortment	171.28.654.SO2	1										045	050	055	060	070	080
654	L=31	340 654 642 451 ...	171.31.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
(1 piece each)	Assortment	171.31.654.SO1	1				015	020	025	030	035	040						
	Assortment	171.31.654.SO2	1										045	050	055	060	070	080

Manuelle Aufbereitung: Anwendung mit Druckbewegung bei max. 90° und Drehbewegung in Uhrzeigersinn.



Manual preparation: application with pressure movement 90° max. and clock - wise rotary movement.

Préparation manuelle: application avec pression et un mouvement de rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Endodontie Stahlinstrumente • Endodontics steel instruments • Instruments endodontiques en acier



173 ...
K-Feilen • K files • Limes K

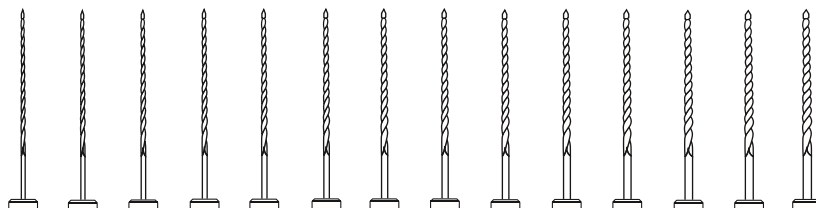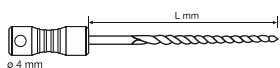

Größe / Size / taille ø 1/100 mm			008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080	
Shank	ISO	REF															
654 L=21	340 654 645 452 ...	173.21.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
(1 piece each)	Assortment	173.21.654.SO1	1			015	020	025	030	035	040						
	Assortment	173.21.654.SO2	1									045	050	055	060	070	080
654 L=25	340 654 646 452 ...	173.25.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
(1 piece each)	Assortment	173.25.654.SO1	1			015	020	025	030	035	040						
	Assortment	173.25.654.SO2	1									045	050	055	060	070	080
654 L=28	340 654 647 452 ...	173.28.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
(1 piece each)	Assortment	173.28.654.SO1	1			015	020	025	030	035	040						
	Assortment	173.28.654.SO2	1									045	050	055	060	070	080
654 L=31	340 654 648 452 ...	173.31.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080
(1 piece each)	Assortment	173.31.654.SO1	1			015	020	025	030	035	040						
	Assortment	173.31.654.SO2	1									045	050	055	060	070	080

Manuelle Aufbereitung: Feilende Bewegungen verbunden mit Drehbewegungen mit max. 45° im Uhrzeigersinn.

Manual preparation: filing motion combined with rotary movement clock-wise 45° max.

Préparation manuelle: mouvement de limage combiné avec une rotation 45° maximum dans le sens des aiguilles d'une montre.



Mit Reamern bis zum Apex aufbereiten.
 Use a reamer to prepare the canal to its apex.

Une broche pour pénétrer dans le canal jusqu'à l'apex.



Die Einschubtiefe mit röntgenopaken Stopperrn mittels Röntgenbild festlegen.

Use radiopaque stoppers to determine the depth of insertion.

Monter un "Stop" pour déterminer la longueur de travail.



Mit aufsteigend großen Hedstroemfeilen wird der Kanal aufbereitet.

Prepare the canal with successively increasing sizes of Hedstroem files.

Elargissement du canal avec des racleurs (limes Hedstroem) de diamètres croissants.



K-Bohrer, K-Feilen und Hedstroemfeilen werden in der Größe 008 bis 080 mit Endo Stopper geliefert.



K reamer, K files and Hedstroem Files are available in the size 008 - 080 with Endo stops.


Broche K, Limes K et les Limes Hedstroem sont disponibles dans la taille de 008 à 080 des Endo Stops.

Endodontie Stahlinstrumente • Endodontics steel instruments • Instruments endodontiques en acier



174 ... 
Hedstroemfeilen
Hedstroem Files
Limes Hedstroem

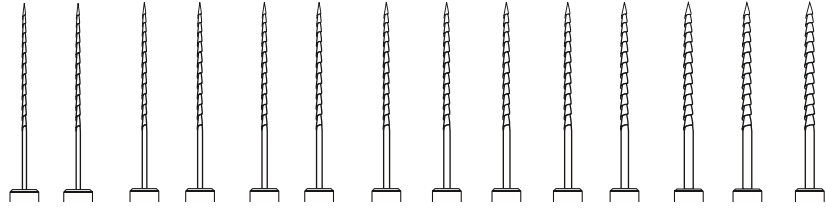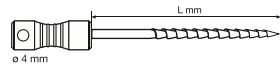

Größe / Size / taille		ø 1/100 mm																		
		008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080																		
Shank	ISO	REF																		
654	L=21	340 654 650 453 ...	174.21.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080		
(1 piece each)	Assortment	174.21.654.SO1	1				015	020	025	030	035	040								
	Assortment	174.21.654.SO2											045	050	055	060	070	080		
654	L=25	340 654 651 453 ...	174.25.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080		
(1 piece each)	Assortment	174.25.654.SO1	1				015	020	025	030	035	040								
	Assortment	174.25.654.SO2											045	050	055	060	070	080		
654	L=28	340 654 652 453 ...	174.28.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080		
(1 piece each)	Assortment	174.28.654.SO1	1				015	020	025	030	035	040								
	Assortment	174.28.654.SO2											045	050	055	060	070	080		
654	L=31	340 654 653 453 ...	174.31.654. ...	6	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080		
(1 piece each)	Assortment	174.31.654.SO1	1				015	020	025	030	035	040								
	Assortment	174.31.654.SO2											045	050	055	060	070	080		

Manuelle Wurzelkanalaufbereitung: Handstückinstrumente nur leicht drückend und ziehend bewegen, ohne das Instrument zu verdrehen.

Manual preparation: use handinstrument in an up-and-down movement, without during and twisting the instrument.

Préparation manuelle: avec un mouvement de haut en bas, sans rotation.



K-Bohrer, K-Feilen und Hedstroemfeilen werden in der Größe 008 bis 080 mit Endo Stopper geliefert.

K reamer, K files and Hedstroem Files are available in the size 008 - 080 with Endo stops.

Broche K, Limes K et les Limes Hedstroem sont disponibles dans la taille de 008 à 080 des Endo Stops.