

iSD900  Garantie 12 mois

NSK
Create it

Visseuse prothétique dynamométrique sans fil

Rapidité & Précision

Des traitements implantaires plus rapides et plus sûrs. L'iSD900, visseuse dynamométrique prothétique sans fil permet de visser-dévisser en toute sécurité des vis, coiffes de cicatrisation et piliers durant les procédures implantaires, rendant le traitement jusqu'à 50% plus rapide.

Compatible avec la majorité des systèmes d'implants

- 3 vitesses de rotation possible (15, 20, 25 tr/min)
- Couple réglable entre 10 et 40 Ncm
- Écran LCD intuitif
- Signal sonore pour indiquer la rotation anti-horaire
- Piles standard pouvant facilement être remplacées sur place
- Économiser 50% de temps par rapport à la procédure manuelle
- Levier ergonomique
- Sans fil

Sécurité : le Torque est réglé pas de risque

Accessibilité simplifiée et **visibilité** améliorée dans les zones postérieures

Maniable sans fil, petite tête

Rapidité du soin



~~2003€~~

~~1305€~~

Avec Dentea, bénéficiez de
8% de remise supplémentaire

1199€

Valable jusqu'au 30 avril 2024



Technologie & Fonctionnalités




Accès simplifié dans les zones postérieures

Il est très difficile d'assurer une bonne visibilité du champ opératoire lors de la rétraction de la muqueuse en utilisant une clé à dynamométrie classique avec les deux mains. L'iSD900 permet une meilleure visibilité sur l'ensemble du champ opératoire.



Système d'étalonnage de couple pour garantir la sécurité

Le Système d'Étalonnage du couple TCS permet un calibrage facile en quelques secondes, garantit un couple précis et offre une tranquillité d'esprit.

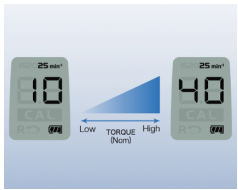

Plage de couple étendue

Un couple précis de 10 à 40 Ncm par palier de 1 ou 5 Ncm peut-être facilement réglé et délivré.



Écran LCD - Panneau de contrôle offrant une bonne visibilité

L'affichage digital LCD montre les paramètres du couple, de la vitesse, de la rotation arrière, de l'état de la batterie et du mode de réglage. L'affichage est clair et très simple d'utilisation.



Levier ergonomique : Extension du bouton Marche/Arrêt

L'iSD900 dispose d'un levier de commande MARCHE/ARRÊT sous forme d'extension repositionnable permettant aux cliniciens de faire fonctionner l'instrument facilement. Il est démontable si nécessaire et peut être stérilisé en autoclave et soumis à une désinfection thermique afin de satisfaire aux règles d'asepsie.



Chargeur perfectionné pour une charge rapide et sans contact

Recharge l'instrument en seulement 90 minutes.

Ensemble Complet iSD900

MODÈLE	RÉF
iSD900	Y1001358

Contenu

- Moteur iSD900 •iSD-HP •Chargeur rapide iSD900
- Calibreur de couple •Bouton Marche/Arrêt

Caractéristiques

- Couple : 10 - 40 Ncm par paliers 1 ou 5 Ncm
- Vitesse 15, 20, 25 min
- Poids : 148 g (Moteur iSD900 + iSD-HP)
- Temps de charge : 90 min
- Durée de fonctionnement continu : 72 min max

Fonctionne avec 2 piles rechargeables Ni-MH



Calibreur de couple
Réf : Z1056



06.73.26.33.28
06.48.46.10.75



dentea@orange.fr



96 chemin du bois d'Aubigney, 33290 le Pian-Médoc