


# PETIT EQUIPEMENT

## MicroEtcher IIA DANVILLE - Sableuse DA 22005

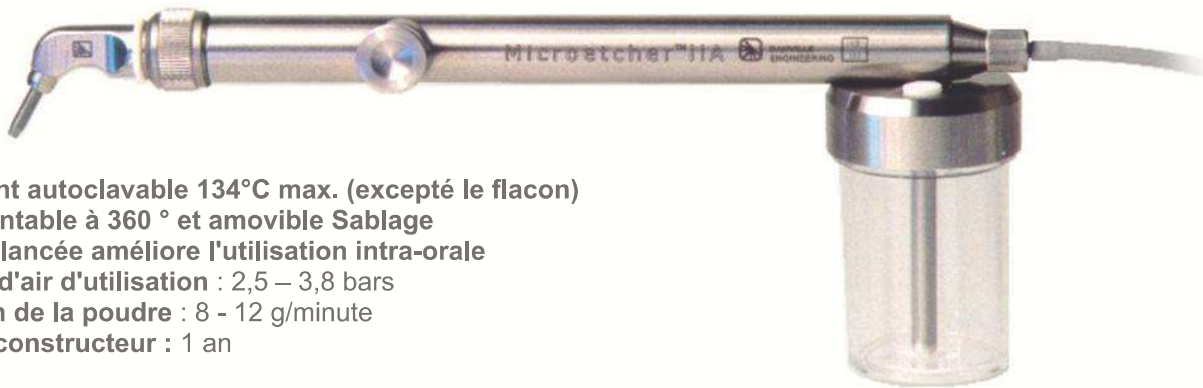

Totalement autoclavable 134°C max. (excepté le flacon)

Buse orientable à 360 ° et amovible Sablage

La buse élargie améliore l'utilisation intra-orale

Pression d'air d'utilisation : 2,5 – 3,8 bars

Utilisation de la poudre : 8 - 12 g/minute

Garantie constructeur : 1 an

Le **MicroEtcher** est une sableuse **intra-orale et extra-orale** de précision grâce à sa buse brevetée orientable à 360 degrés.

- ✓ Nettoyage de puits et fissures avant scellement des sillons
- ✓ Réparation intra-orale de céramique, de composite
- ✓ Élimination de tâches et coloration
- ✓ Amélioration de l'adhésion à la dent y compris avant mordançage à l'acide
- ✓ Élimination des ciments provisoires et définitifs dans l'intrados des prothèses
- ✓ Réparation de prothèse amovible.
- ✓ S'utilise avec l'oxyde d'alumine 50 et 90 microns

MicroEtcher IIA est livré avec 1 buse 60 ° 1,2 mm + 2 réservoirs + 1 tubulure



### Abrasifs - Flacon 454g

- ✓ Alumine 50µm (intra et extra oral)
- ✓ Alumine 90µm (extra oral)
- ✓ OrthoProphy SA-85 - 85µm: Retire sans risque colles et composites

### Sand Trap

Bulles de protection des projections d'abrasif Par boîte de 15 bulles. Se raccordent sur l'aspiration



### Cabine aspirante microcab+ 22 x 16 27cm / 3,2 kg

- ✓ Pas de projection lors du sablage, nettoyage de brackets, fraisage
- ✓ Sécurité - Travail propre - Gain de temps
- ✓ Ne nécessite qu'une prise électrique pour fonctionner
- ✓ Aspiration intégrée très efficace et silencieuse
- ✓ Eclairage agréable et puissant
- ✓ Nettoyage simple et rapide du filtre

