



IMPLANTOLOGIE

CISEAUX À OS

CISEAUX À OS




CISEAUX À OS - BISEAU SIMPLE

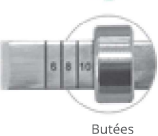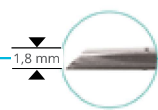

Outil de serrage
REF. 200.20

CISEAUX À OS - BISEAU DOUBLE

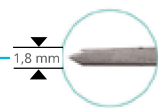

IMPLANTOLOGIE

RÂPES À OS & ÉCARTEURS D'OS

RÂPES À OS



ÉCARTEURS D'OS - COINS ANGULEUX



Coins anguleux

ÉCARTEURS D'OS - COINS ARRONDIS



Coins arrondis



IMPLANTOLOGIE

OSTÉOTOMES

OSTÉOTOMES DROITS CONVEXES



Outil de serrage
REF. 200.20

OSTÉOTOMES DROITS CONIQUES CONVEXES



Outil de serrage
REF. 200.20


OSTÉOTOMES DROITS CONCAVES



OSTÉOTOMES ANGULÉS CONVEXES




OSTÉOTOMES ANGULÉS CONCAVES

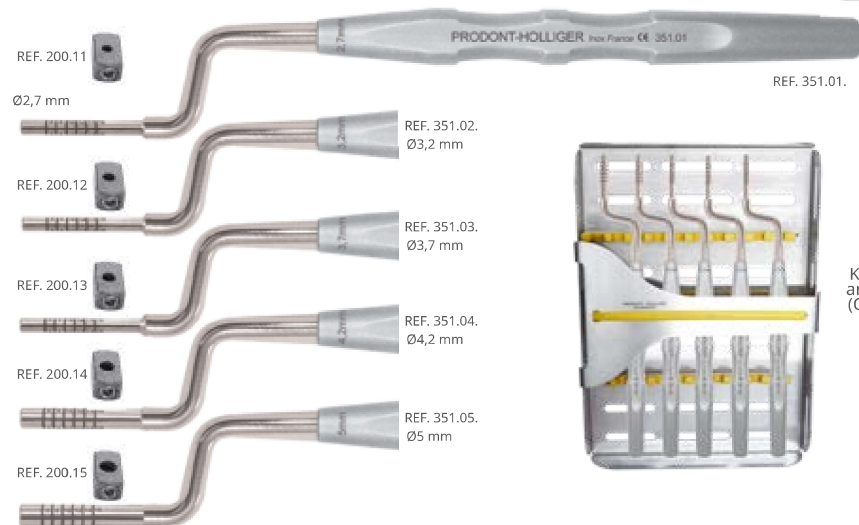

Kit 5 ostéotomes
angulés concaves
(Cassette offerte)
REF. 351.11

OSTÉOTOMES ANGULÉS CONVEXES

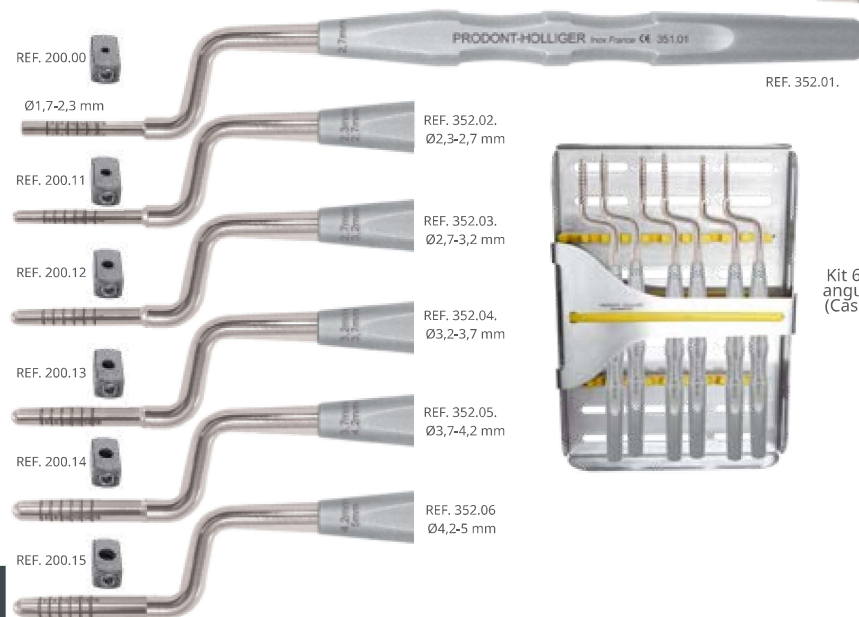

Kit 6 ostéotomes
angulés convexes
(Cassette offerte)
REF. 352.11

BUTÉES

BUTÉES POUR CISEAUX À OS			BUTÉES POUR OSTÉOTOMES						OUTIL DE SERRAGE
4 mm REF. 200.01	6 mm REF. 200.02	8 mm REF. 200.03	Ø2,3 mm REF. 200.00	Ø2,7 mm REF. 200.11	Ø3,2 mm REF. 200.12	Ø3,7 mm REF. 200.13	Ø4,2 mm REF. 200.14	Ø5 mm REF. 200.15	REF. 200.20

MAILLETS EMBOUTS TEFLON



ÉCARTEURS


FARABOEUF (2X) REF. 151.00



ÉCARTEUR CONTRE-ANGULÉ REF. 151.03



DAUTREY

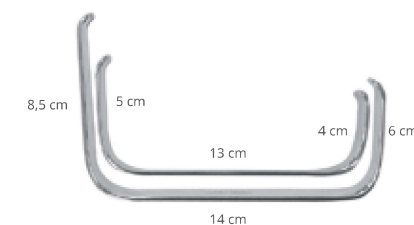

CUPULES INOX

STÉRILISATION 180°



CUILLÈRE À OS



DR FALCON



CURETTE & MORTIER À OS






Ø4 cm
h 3,5 cm
28 g
REF. 390.00



REF. 395.00

INSTRUMENTS DE MESURE

COMPAS DE CASTROVIEJO

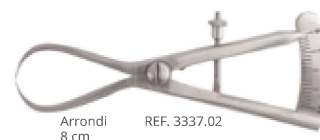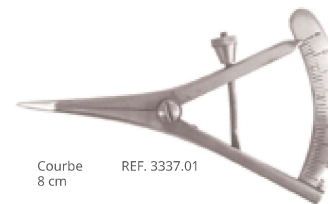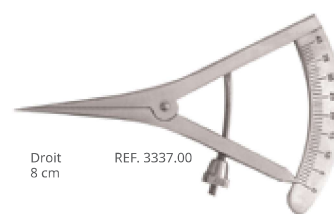

TOURNEVIS



- Pour visser ou dévisser manuellement les pièces prothétiques.
- Compatible avec tous les embouts pour contre angle.
- Longueur importante et petit diamètre: placement facile à la perpendiculaire des pièces
- Système de cardan pour rotation à distance.
- Très apprécié sur les zones buccales postérieures.
- Avec bague de verrouillage, peut être utilisé comme un tournevis droit.



TOURNEVIS CONTRE-ANGLE

- Très pratique pour intervenir dans les zones étroites difficilement accessibles
- Compatible avec les outils de toutes les marques



IMPLANTOLOGIE

PRÉCELLES À TISSUS

PRÉCELLES À TISSUS ADSON



12,5 cm
REF. 222.10




12 cm
REF. 222.11



12,5 cm
REF. 222.12

PRÉCELLES À TISSUS

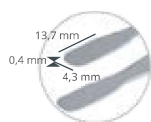

Précelle mors plats à tissu ou greffe de
membrane 12 cm
REF. 222.13

CASTROVIEJO



Mors droits

REF. 747.01TC



Mors courbes

REF. 747.02TC



Mors courbes

REF. 747.12TC


**CARBURE DE
TUNGSTÈNE (TC) :**
EFFET GRIP,
RÉSISTANCE À
L'USURE

L'AIGUILLE NE
TOURNE PLUS DANS
LES MORS !

LAGRANGE



- Forme anatomique
- Enjambe l'arcade
- Evite de piquer le patient

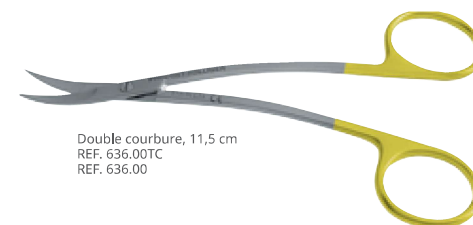


Double courbure, 11,5 cm
REF. 636.00TC
REF. 636.00

CARBURE DE TUNGSTÈNE (TC) :
RÉSISTANCE A L'USURE
QUALITÉ DE COUPE PRÉSERVÉE

METZENBAUM



14 cm
REF. 651.00TC

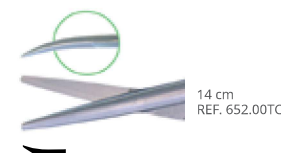

14 cm
REF. 652.00TC

LE FIL NE "GLISSE" PLUS !

IMPLANTOLOGIE

DÉCOLLEUR DU DR ROOS & TOURNEVIS

DÉCOLLEUR DU DR ROOS

3 EN 1

TOUS LES AVANTAGES D'UN DÉCOLLEUR, D'UN ÉCARTEUR ET DE LA VISION D'UN EXCELLENT MIROIR PURE REFLECT !



UTILISATION

- Décoller les tissus mous.
- Rétracter et écarter avec appui osseux.
- Grâce au miroir intégré, contrôle visuel de l'acte chirurgical pendant sa réalisation.



Mise en place d'implant avec contrôle de l'axe, forage et vissage



Contrôle de l'élimination du tartre et des défauts osseux dans le miroir



Contrôle de la résection apicale (opération d'un abcès sur l'extrémité de la racine de la dent) lors de chaque phase: décollement de la gencive, forage de l'os, section de la pointe de la racine, curetage de la cuvette osseuse, préparation et obturation du canal



Photographie sous microscope ou à vue indirecte permet d'augmenter la profondeur de champ

CASSETTE IMPLANTOLOGIE



Contient

Manche miroir
Précelle Collège satinée
Précelle Adson
Sonde n°6
Détartreur CK6
Curette à os Hemingway
Manche de bistouri
Spatule H.E.I. n°1
Cuillère à os
Porte-aiguille Castroviejo mors droits
Ciseaux Joseph
Écarteur contre-angulé
Élévateur luxateur

KIT XL REF. 360XL

210.00XL
220.02S.
222.12
262.06XL
404.06XL
135.02XL
610.00XL
193.01XL
407.10XL
747.01TC
628.00
151.03
159.79

KIT Design REF. 360D

210.00D
220.02S.
222.12
262.06D
404.06D
135.02D
601.03
193.01D
407.10D
747.01TC
628.00
151.03
159.79

IMPLANTOLOGIE

MINI-DÉCOLLEURS DE PAPILLES & ÉLEVATEURS DE SINUS

MANCHE AU CHOIX

Les instruments sont disponibles au choix avec le manche **XL Style** ou le manche **Design**.



XL Style REF se terminant par XL




Design REF se terminant par D


MINI-DÉCOLLEURS DE PAPILLES



MOLT

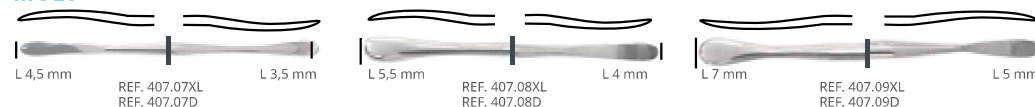

BENQUE

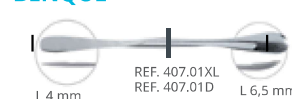

GOLDMAN-FOX



PRITCHARD




HOURIGAN



MINI DÉCOLLEUR DE SINUS DU DR FALCON



DÉCOLLEURS DE MEMBRANE SINUSIENNE

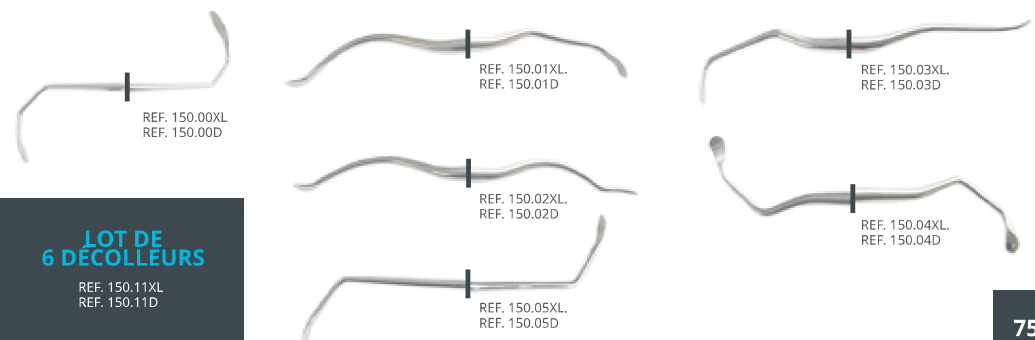


LOT DE 6 DÉCOLLEURS



REF. 150.11XL
REF. 150.11D

EXTRACTEURS D'IMPLANTS

Kit pour dent longue /
grande ouverture de bouche
REF. 300.34

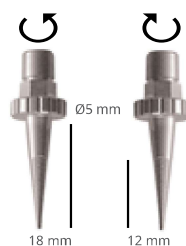

Kit pour dent courte /
petite ouverture de bouche
REF. 300.56

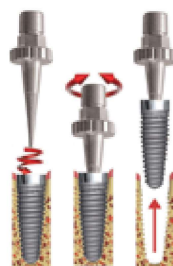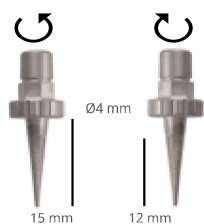

► Moins traumatisants en implantologie, les extracteurs minimisent les pertes osseuses en évitant l'utilisation de fraise trépan. Les douleurs post-opératoires sont réduites et il est possible de réimplanter lors de la même séance.

► En cas d'ostéointégration avancée, déstabiliser l'implant de la table osseuse avec des ultrasons. Utiliser alternativement les extracteurs droit puis gauche pour rompre progressivement la liaison osseuse.

► Pour un implant mal ostéointégré, visser l'extracteur gauche dans l'implant pour le faire remonter.

EXTRACTEUR DE VIS

L'extracteur de vis permet de remonter en tournant à gauche une vis dont la tête est abîmée (percer préalablement un trou avec la fraise Ø0,6 mm).



REF. 300.12



L'extracteur de vis se fixe sur contre angle ou sur l'adaptateur universel (ref. 300.09)

ADAPTATEUR UNIVERSEL



ADAPTATEUR UNIVERSEL
pour vos tournevis contre angle
REF. 300.09

CLE À CLIQUET / DYNAMOMETRIQUE



CLE À CLIQUET / DYNAMOMETRIQUE
10/40 N/cm
REF. 300.01

KIT CLÉ + ADAPTATEUR



KIT CLÉ + ADAPTATEUR
REF. 300.19

KIT 2 EXTRACTEURS D'IMPLANTS + CLÉ



LONGS
REF. 300.20



COURTS
REF. 300.21


KIT EXTRACTION DE VIS



avec 1 extracteur de vis, 1 fraise boule
REF. 300.27



avec clé, adaptateur, 1 extracteur de vis,
1 fraise boule
REF. 300.26

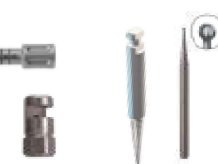

KIT EXTRACTION



avec clé, adaptateur, 2 extracteurs d'implants, 1 extracteur de vis, 1 fraise boule, 1 cassette de stérilisation.
REF. 300.24 - avec extracteurs longs
REF. 300.25 - avec extracteurs courts



Voir la vidéo
clinique sur
YouTube