



SCHWERT
DENTAL **19**
SEIT 1896



Prothetik

Prosthodontic

207

Prothetik
Prosthodontic

7. Prothetik · Prosthodontic

Modellierinstrumente · Carving instruments



4422 HYLIN



4446 HYLIN - LE CRON



4447



3254 MITCHELL



4470 Silikonmesser mit schneidender Öse
Silicone knife with cutting ring



4510 FAHNENSTOCK, 13,0 cm



4512 FAHNENSTOCK, 17,0 cm

7. Prothetik · Prosthodontic

Modellierinstrumente · Carving instruments



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

209



4479-1 PK-THOMAS, Aluminiumgriff
PKT1 PK-THOMAS, Aluminium handle



4479-2 PK-THOMAS, Aluminiumgriff
PKT2 PK-THOMAS, Aluminium handle



4479-3 PK-THOMAS, Aluminiumgriff
PKT3 PK-THOMAS, Aluminium handle



4479-4 PK-THOMAS, Aluminiumgriff
PKT4 PK-THOMAS, Aluminium handle



4479-5 PK-THOMAS, Aluminiumgriff
PKT5 PK-THOMAS, Aluminium handle



4516 12,0 cm



4517 17,0 cm

Prothetik
Prosthodontic

7. Prothetik · Prosthodontic

Gips Instrumente · Plaster instruments



4560

19,0 cm
Spatel für Abdruckmasse
Spatula for impression
materials

sehr flexibel
very flexible



4558

20,0 cm
Gipsschneidezange
Plaster cutting pliers



4542

GRITMAN
16,0 cm
Gipsmesser
Plaster knife



i

Kronen- und Blechscheren · Crown / sheet metal scissors

- hochwertiger Stahl
- präzise Schneidekante
- leichter Gang
- speziell gehärtet
- geringe Abnutzung

- high quality steel
- precise cutting
- easy going
- special hardened
- less friction and wear out



4821
BEEBEE
10,5 cm
spitz, gerade
sharp, straight



4825
BEEBEE
10,5 cm
spitz, gebogen
sharp, curved



4845
BEEBEE
12,0 cm
gezahnt, gebogen
serrated, curved



4862
12,5 cm
gezahnt
serrated



4863
12,5 cm
Universal
Kronenscherer mit
TC-Einsätzen
Universal crown
scissors with
TC inserts

7. Prothetik · Prosthodontic

Retraktionsfadenstopfer · Retraction cord packers

i

Retraktionsfadenstopfer · Retraction cord packers

Um Retraktionsfäden optimal platzieren zu können.

- Je ein Instrument speziell für bukkal / lingual bzw. mesial / distal
- Speziell gebogene und flexible Arbeitsenden, konkav ausgeformt für optimale Anpassung
- Durch mikroverzahnte Arbeitsenden wird ein Abrutschen des Fadens vermieden

To place retraction cords fast and easy.

- One instrument for buccal / lingual and one for mesial / distal
- Special bended and flexible active parts, concave for perfect adaption
- Micro serrated tips for a perfect grip



4880-1 Retraktionsfadenstopfer, gezahnt, bukkal / lingual
Retraction cord packer, serrated, buccal / lingual



4880-2 Retraktionsfadenstopfer, gezahnt, mesial / distal
Retraction cord packer, serrated, mesial / distal



4880-3 UNIVERSAL Retraktionsfadenstopfer, gezahnt, 45° gewinkelt
UNIVERSAL Retraction cord packer, serrated, 45° angled



4880-4 UNIVERSAL Retraktionsfadenstopfer, gezahnt
UNIVERSAL Retraction cord packer, serrated



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Retraktionsfadenstopfer · Retraction cord packers

Die bewährten SCHWERT Retraktionsfadenstopfer nun auswechselbar, im **COLOR CODE** Griff

The approved SCHWERT retraction cord packers, now available with exchangeable tips in **COLOR CODE** handle.



4881-1


Retraktionsfadenstopfer bukkal / lingual, grün, auswechselbar
Retraction cord packer buccal / lingual, green, exchangeable

213



4881-2

Retraktionsfadenstopfer distal / mesial, blau, auswechselbar
Retraction cord packer distal / mesial, blue, exchangeable

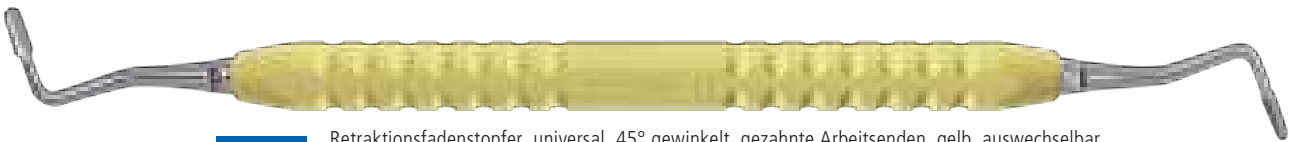

4881-3

Retraktionsfadenstopfer, universal, 45° gewinkelt, gezahnte Arbeitsenden, gelb, auswechselbar
Retraction cord packer, universal, 45° angulated, serrated working tips, yellow, exchangeable



4881-4

Retraktionsfadenstopfer, rund, gezahnt, grau, auswechselbar
Retraction cord packer, round, serrated, grey, exchangeable

Prothetik
Prosthodontic

7. Prothetik · Prosthodontic

Universal Kronenabnahmezangen / Hirtenstab · Universal crown removing pliers / shepherd's crook



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

214



4930-14

Haftpulver für Kronenabnahmezange 4930, 1 Döschen mit Inhalt 10g
Diatrac adhesive powder for universal crown removing pliers 4930, 1 little jar contains 10g

4930

Universal Kronenabnahmezange mit austauschbaren Kunststoffbacken im Set: Zange mit Feststellschraube und Rückholfeder, 20 Polymer Kunststoffbacken und 10g Diatrac Adhäsivpulver
Universal crown removal pliers with exchangeable plastic tips. Set including: Pliers with adjustment screw and retaining spring, 20 plastic-polymer tips and 10g Diatrac adhesive powder



Für komplizierte Abnahmen
For difficult removals


4930-15

Kunststoffbacken für 4930, Päckchen mit 40 St.
Plastic inserts for 4930, package of 40 pcs.



4930-13

Nachbestell Set:
10g Diatrac Adhäsivpulver,
40 Polymer Kunststoffbacken
Replacement set:
10g Diatrac adhesive powder,
40 plastic-polymer tips

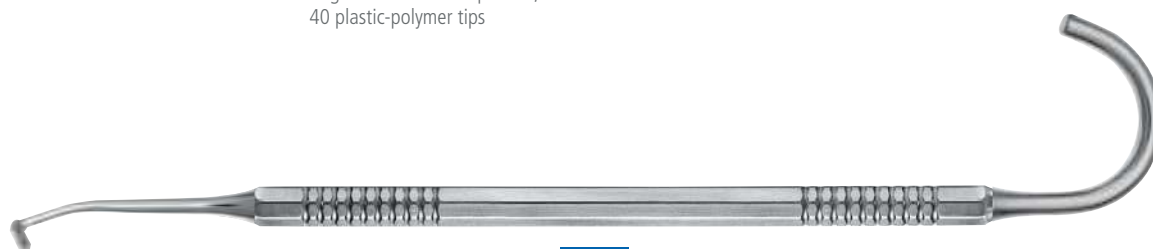

4920

TREYMANN
16,0 cm
Hirtenstab
Shepherd's crook

7. Prothetik · Prosthodontic

Kronenabnehmer · Crown removers



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

215



4924-10

MORELL
mit Ansätzen **4924-1**, **4924-2**
und **4924-3**
with tips **4924-1**, **4924-2**
and **4924-3**

4924

MORELL
mit Ansätzen **4924-1** und **4924-2**
with tips **4924-1** and **4924-2**



4925-10

MORELL
mit Ansätzen **4924-1**, **4924-2**
und **4924-3**
with tips **4924-1**, **4924-2**
and **4924-3**

4925

MORELL
mit Ansätzen **4924-1** und **4924-2**
with tips **4924-1** and **4924-2**



4924-1



4924-2



4924-3

Prothetik
Prosthodontic



7. Prothetik · Prosthodontic

Lift-EX Kronenabnehmer · Lift-EX Crown removers

i

Lift-EX



4924-22

DOUBLE LOOP TIP
Set mit DOUBLE LOOP TIP,
Schlüssel **4924-25** und
Adapter **4924-26**
Set including DOUBLE LOOP TIP,
key **4924-25** and
adapter **4924-26**




4924-26

Adapter
Adapter



4924-25

Schlüssel
Key

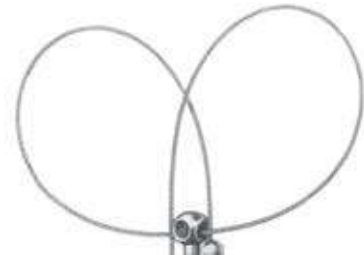

4924-32

Ersatzschleife für
DOUBLE LOOP TIP, 2 Stück
Spare loop for
DOUBLE LOOP TIP, 2 pieces

216

	Art. Nr. Set Item No. Set	Set beinhaltet Set consisting of
	<p>4924-122</p>	<p>DOUBLE LOOP TIP 4924-22 und MORELL 4924 DOUBLE LOOP TIP 4924-22 und MORELL 4924</p>
	<p>4925-122</p>	<p>DOUBLE LOOP TIP 4924-22 und MORELL 4925 DOUBLE LOOP TIP 4924-22 und MORELL 4925</p>


7. Prothetik · Prosthodontic

Kronenabnehmer / -spreizer · Crown removers / spreaders



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

217

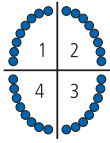

4927

UNIVERSAL

Die unterschiedlichen Flächen im Arbeitsende erlauben einen universellen Zugang zu den verschiedenen Zahnflächen

The different prepared surfaces in the working tip allow a very universal approach to the different teeth areas



3100-1

TC Einsätze erlauben einen sicheren Halt zum Entfernen von temporären Brücken und Kronen.

TC inserts allow a safe grip for removing temporary bridges and crowns.



4928

Kronenlockerer
Crown removing instrument



4929

Kronenlockerer
Crown removing instrument



4943

TC

Prothetik
Prosthodontic



7. Prothetik · Prosthodontic



Kronenspreizzange · Crown spreader

i

Kronenspreizzange · Crown spreader

Mit der SCHWERT Kronenspreizzange werden Rotationskräfte beim Spreizen der Krone zuverlässig verhindert, zum Schutz der darunter liegenden Wurzel und des Nervs.
With the SCHWERT crown spreader it is possible to spread off crowns without rotation on the root underneath, in order to protect the nerve.

1. Mit dem Kronentrenner wird die zu entfernende Krone geschlitzt.
The crown is getting slotted with a burr.
2. Die Zange wird je nach Anbringung des Schlitzes von okklusal, bukkal oder lingual eingesetzt. Durch Zusammendrücken der Zange, wird die Krone aufgespreizt.
Insert the plier into the slit, according to its position from occlusal, buccal or lingual.
3. Die Spreizfunktion der Zange garantiert eine sichere und anatomisch korrekte Anwendung. Vorteil dieses Instruments: Keine Rotation an der Wurzel oder unerwünschten Druck an Nachbarzähnen.
The crown is getting spreaded securely and anatomically correct by compressing the plier. The advantages of the instrument are: there is no rotation on the root or pressure on neighbor teeth.

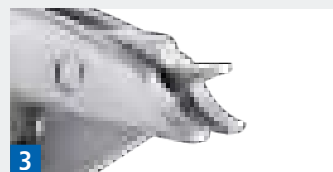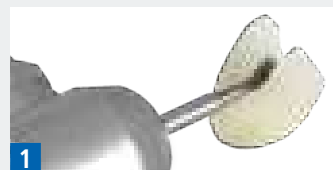

7. Prothetik · Prosthodontic

Kronenabnahmezangen · Crown trial forceps



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

219



4940-170





4940-220



4940-101

1 Paar Kunststoffbacken
passend für **4940-170**,
4940-220 und **4940-223**
1 pair of inserts
suitable for **4940-170**,
4940-220 and **4940-223**

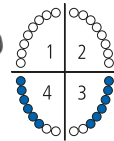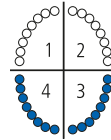

4940-223



4940-100

1 Paar Kunststoffbacken
passend für **alte Modelle (ohne Abbildung)**
4940-17, **4940-22** und **4940-217**
1 pair of inserts
suitable for **old models (without illustration)**
4940-17, **4940-22** and **4940-217**

Prothetik
Prosthodontic

7. Prothetik · Prosthodontic

Teleskopkronenzangen · Pliers for telescope crowns



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

220



 **4947-4**

Ø 2,35 mm
12,5 cm
Diamantierte Spitzen
Diamond tips

 **4947-40**

(ohne Abbildung ·
without illustration)
1 Paar Ersatzspitzen
1 pair replacement tips

 **4947-6**

(ohne Abbildung ·
without illustration)

1 Paar Ersatzspitzen für altes Modell 4947-5
1 pair replacement tips for old model 4947-5



4947-48

1 Paar Ersatzschrauben für Diamantspitzen 4947-40 und 4947-51S
1 pair replacement screws for diamond tips 4947-40 and 4947-51S



 **4947-51**

Ø 1,6 mm
12,5 cm
Diamantierte Spitzen
Diamond tips

 **4947-51S**

(ohne Abbildung ·
without illustration)
1 Paar Ersatzspitzen
1 pair replacement tips



4947-8

1 Paar Ersatzschrauben für Diamantspitzen 4947-6
1 pair replacement screws for diamond tips 4947-6

7. Prothetik · Prosthodontic

Abformlöffel Anatomic Ehricke Oberkiefer · Impression trays anatomic Ehricke maxilla



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

221

Bezahnte Oberkiefer (BO) · Regulars maxilla

4970-110

SUP B0

4970-111

SUP B1

4970-112

SUP B2

4970-113

SUP B3

4970-114

SUP B4



Unbezahnte Oberkiefer (UO) · Edentulous maxilla

4970-131

SUP U1

4970-132

SUP U2

4970-133

SUP U3



Partiell bezahnte Kiefer (PO) · Partials, depressed centers

4970-121

SUP P1

4970-122

SUP P2

4970-123

SUP P3



Funktionsabdrücke (FO) · Functional impressions

4970-141

SUP F1

4970-142

SUP F2

4970-143

SUP F3



Prothetik
Prosthodontic



7. Prothetik · Prosthodontic

Abformlöffel Anatomic Ehricke Unterkiefer · Impression trays anatomic Ehricke mandible

Bezahnte Unterkiefer (BU) · Regulars mandible

4970-210

INF B0

4970-211

INF B1

4970-212

INF B2

4970-213

INF B3

4970-214

INF B4

i

- höchste Qualität
- anatomisch korrekte Form
- leicht zu reinigen
- rostfreier Edelstahl
- ergonomischer Griff, für präzise Abdrücke

- superior quality
- anatomical correct shapes
- easy to clean
- Stainless Steel
- ergonomic handle, for precise impressions



222

Partiell bezahnte Kiefer (PU) · Partials, depressed centers

4970-222

INF P2

4970-223

INF P3



Unbezahnte Unterkiefer (UU) · Edentulous

4970-231

INF U1

4970-232

INF U2

4970-233

INF U3



7. Prothetik · Prosthodontic

Abformlöffel Anatomic Ehricke Oberkiefer · Impression trays anatomic Ehricke maxilla



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

223

Bezahnte Oberkiefer (BO) · Regulars maxilla

4972-110

SUP B0

4972-111

SUP B1

4972-112

SUP B2

4972-113

SUP B3

4972-114

SUP B4



Unbezahnte Oberkiefer (UO) · Edentulous maxilla

4972-131

SUP U1

4972-132

SUP U2

4972-133

SUP U3



Partiell bezahnte Kiefer (PO) · Partials, depressed centers

4972-121

SUP P1

4972-122

SUP P2

4972-123

SUP P3



Prothetik
Prosthodontic



7. Prothetik · Prosthodontic

Abformlöffel Anatomic Ehricke Unterkiefer · Impression trays anatomic Ehricke mandible

Bezahnte Unterkiefer (BU) · Regulars mandible

4972-210

INF B0

4972-211

INF B1

4972-212

INF B2

4972-213

INF B3

4972-214

INF B4

i

- höchste Qualität
- anatomisch korrekte Form
- leicht zu reinigen
- rostfreier Edelstahl
- ergonomischer Griff, für präzise Abdrücke

- superior quality
- anatomical correct shapes
- easy to clean
- Stainless Steel
- ergonomic handle, for precise impressions

224



Partiell bezahnte Kiefer (PU) · Partials, depressed centers

4972-221

INF P1

4972-222

INF P2

4972-223

INF P3



Unbezahnte Unterkiefer (UU) · Edentulous

4972-231

INF U1

4972-232

INF U2

4972-233

INF U3



7. Prothetik · Prosthodontic

Abformlöffel für Teilabdrücke · Impression trays for partial impressions



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

225

4976-2

FIG. L2
A = 50 mm

4977-2

FIG. R2
A = 50 mm

4976-3

FIG. L3
A = 55 mm

4977-3

FIG. R3
A = 55 mm

4978-1

FIG. L1
A = 46 mm

4979-1

FIG. R1
A = 46 mm

4978-2

FIG. L2
A = 50 mm

4979-2



FIG. R2
A = 50 mm

4978-3

FIG. L3
A = 55 mm

4979-3

FIG. R3
A = 55 mm

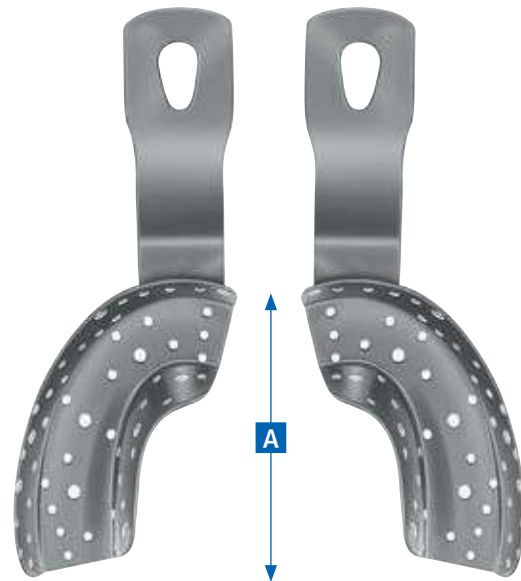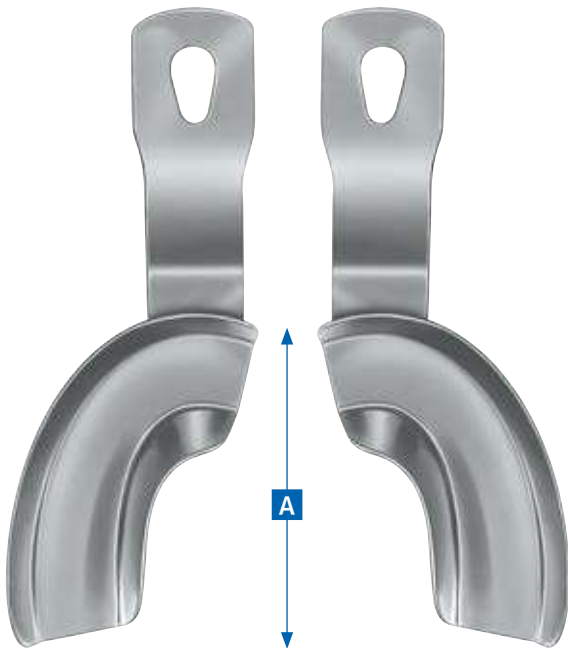

4980

STOLLEY
mit Schieber
with bolt

4981

STOLLEY
mit Schraube
with screw

4982

STOLLEY
mit Schieber
with bolt

4983

STOLLEY
mit Schraube
with screw



Prothetik
Prosthodontic



7. Prothetik · Prosthodontic

Abformlöffel für Implantologie · Impression trays for implantology

i

Abformlöffel für Implantologie nach HELFGEN Impression trays for implantology acc. to HELFGEN


- Einfache Handhabung
 - Offene und geschlossene Implantatabformung
 - Korrekturabformung möglich
 - Präzisionssteigerung
 - Auch bei Sonderindikation universell einsetzbar
 - Nur eine Abdrucksitzung notwendig
 - Sterilisierbar
 - Zeit- und Kostenersparnis
- Simple handling
 - Open and closed implant impression
 - Putty-wash impression possible
 - Precision enhancement
 - Universally usable in case of special indications
 - Only one impression session required
 - Sterilizable
 - Time and cost efficient

226



4990-300

Ausstecher
Perforator

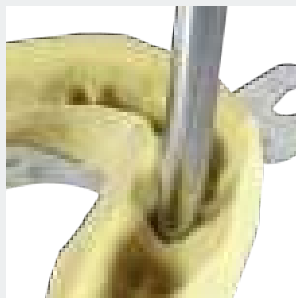

Oberkiefer · Maxilla

4990-111

SUP 1

4990-112

SUP 2

4990-113

SUP 3

4990-114

SUP 4

Unterkiefer · Mandible

4990-211

INF 1

4990-212

INF 2

4990-213

INF 3

4990-214

INF 4






i

Funktionsweise der Abdrucklöffel Functionality of the Impression trays

1. Im Bereich der präparierten Zähne werden Retraktionsfäden gelegt. In die Implantate werden glatte, retentionslose Schrauben eingedreht.
2. Der zusammengesetzte Löffel wird nur an den seitlichen Wänden mit Haftlack bestrichen und dann mit Heavy-body-Silikon beschickt.
3. Zur initialen Abformung wird der Löffel so weit abgesenkt, bis der abnehmbare Löffelboden auf den glatten Implantatschrauben aufliegt.
4. Nach Entnahme der Erstabformung werden die glatten Schrauben gegen die Abdruckpfosten ausgetauscht.
5. Nach Entfernung des Löffelbodens kann der abgeformte Schraubenkanal einfach mit dem Ausstecher erweitert werden.
6. Der erweiterte Pfostenkanal kann zur störungsfreien Reponierbarkeit der Abformung noch zusätzlich mit einer grob verzahnten Fräse erweitert werden.
7. Nach Umspritzung des Abformbereiches mit Light-body-Silikon läßt sich die reponierte Abformung durch die Öffnungen im Bereich der Pfostenkanäle bei Bedarf auffüllen.
8. Nach Aushärtung des Korrekturmateri als werden die Pfostenverschraubungen gelöst. Die fertige Abformung kann entnommen werden.

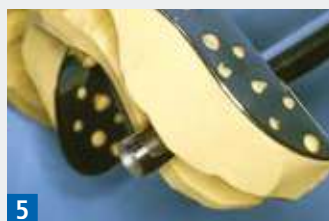



7. Prothetik · Prosthodontic

Prothetik Schraubendreher Kit · Prosthetics screwdriver kit

i

Prothetik Schraubendreher Kit · Prosthetics screwdrivers kit

Die Anzahl verschiedener Implantatsysteme nimmt ständig zu und in Praxis und Labor müssen laufend Implantat-Abutments aller Art gelöst werden. Mit dem SCHWERT Prothetik Schraubendreher Set können über 90% der am Markt etablierten Verschraubungen gelöst werden.

The number of different Implant systems is increasing constantly and in dental practice and dental lab it is necessary to loosen implant abutments of all kinds. By using the SCHWERT Prosthetics screwdriver set it is possible to loosen more than 90% of the established screwings.


- Die einzelnen Instrumente sind im Tray zur schnellen Identifizierung gekennzeichnet.
 - Es ist jeweils eine kurze und lange Version enthalten.
 - Die einzelnen Schraubendreher können über das Winkelstück betrieben, oder per Adapter und Finger- / kalibrierter Drehmomentratsche eingedreht werden.
 - Die Schraubendreher sind für Drehmomente > 30 Ncm Hexagon-Spannsystem kompatibel.
- Each instrument is marked in the tray for fast identification. The kit contains always a short and a long version.
 - The screwdrivers fit in the hand piece or can be used by adapter and a finger / torque ratchet.
 - The hexagonal receptacle system allows torques > 30 Ncm to be transferred.

228



6802-50

Einbringhilfe zur manuellen Verschraubung ohne Ratsche
Inserting assistant for manual screwing without wrench

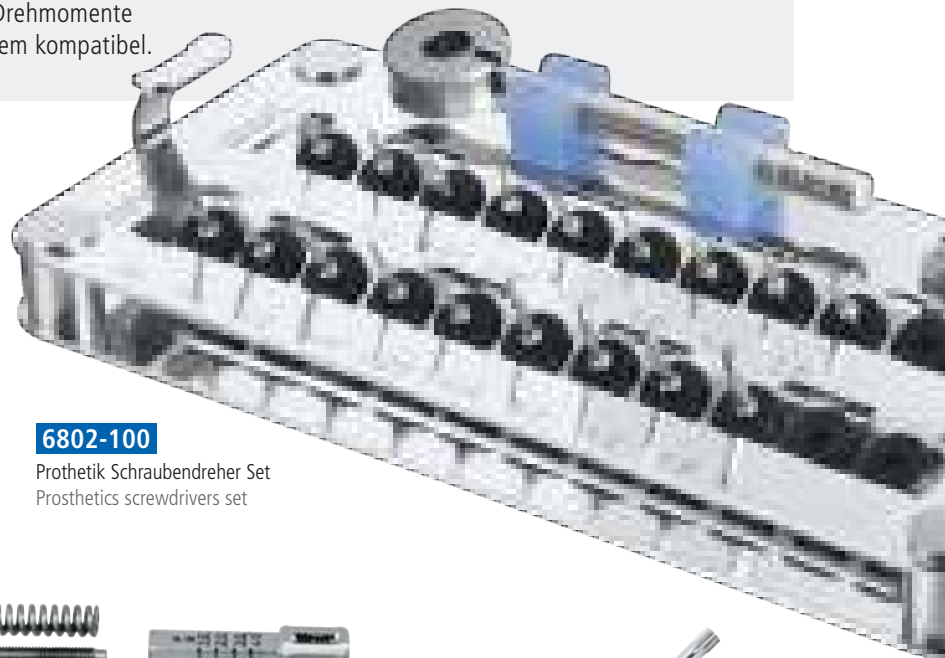

6802-100

Prothetik Schraubendreher Set
Prosthetics screwdrivers set



6802-72

Drehmomentratsche: RKI-konform komplett zerlegbar zur Aufbereitung
Torque wrench: Completely dismantlable for reprocessing



Hexagon Spannsystem kompatibel für Drehmomente >30 Ncm
Hexagon chucking system compatible for torques >30 Ncm



Entnahmehilfe im Rack integriert
Detaching assistant included in the rack










7. Prothetik · Prosthodontic

Prothetik Schraubendreher Kit · Prosthetics screwdriver kit



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

229










Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
6802-100	Schraubendreher Kit: 18 Schlüssel, 1 Ratsche, 1 Eindrehhilfe/Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers kit: 18 keys, 1 ratchet, 1 inserting assistant / adapter, 1 rack, 1 box
6803-100	Schraubendreher Kit: 18 Schlüssel, 1 Drehmomentratsche , 1 Eindrehhilfe/Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers kit: 18 keys, 1 ratchet with torque , 1 inserting assistant / adapter, 1 rack, 1 box
6802-72	Ratsche mit Drehmoment, 10 Ncm bis 40 Ncm, mit Fixierfunktion zum Deaktivieren des Drehmoments (im Kit 6803-100 enthalten) Ratchet with torque, 10 to 40 Ncm, with fixing function for deactivating the torque (included in kit 6803-100)
6802-70	Ratsche mit abnehmbarem Griff / manuelle Eindrehhilfe (im Kit 6802-100 enthalten) Ratchet with removable handle / manual inserting assistant (included in kit 6802-100)
6801-01	Rack für Schraubendreher Rack for screwdrivers
2608-32	Edelstahl Box gelocht 18 x 9 x 3 cm (ohne Abbildung) Stainless steel box perforated 18 x 9 x 3 cm (without illustration)
6802-50	Eindrehhilfe/Adapter, für alle Schlüssel Inserting assistant/adapter for screwdrivers, for all keys
Schraubendreher, kurz, 21 mm · Screwdrivers, short, 21 mm	
	6802-01 Torx T6 x 21 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 21 mm, Straumann, Aesthura
	6802-02 Schlitz 1,6 x 21 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 21 mm, universal flat narrow
	6802-03 Schlitz 2,0 x 21 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 21 mm, universal flat wide
	6802-04 Sechskant SW 0,03 Zoll x 21 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 21 mm, CAMLOG
	6802-05 Sechskant SW 0,05 Zoll x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I
	6802-06 Sechskant SW 0,9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE
	6802-07 Sechskant SW 1,0 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 21 mm, Ankylos
	6802-08 Sechskant SW 1,2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, Biomet 3I
	6802-09 Sechskant SW 1,8 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 21 mm, Ankylos

ALLE HANDELSMARKEN SIND DAS EIGENTUM DER JEWELIGEN FIRMEN. Für Abweichungen aufgrund implantatseitiger Toleranzen können wir keine Gewährleistung übernehmen!
ALL TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THE RESPECTIVE COMPANIES. For deviations due to implant's tolerances we can't take any guarantee.



7. Prothetik · Prosthodontic

Prothetik Schraubendreher Kit · Prosthetics screwdriver kit

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
		Schraubendreher, lang, 26 mm · Screwdrivers, long, 26 mm
	6803-01	Torx T6 x 26 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 26 mm, Straumann, Aesthura
	6803-02	Schlitz 1,6 x 26 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 26 mm, universal flat narrow
	6803-03	Schlitz 2,0 x 26 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 26 mm, universal flat wide
	6803-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 26 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 26 mm, CAMLOG
	6803-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I
	6803-06	Sechskant SW 0,9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE
	6803-07	Sechskant SW 1,0 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 26 mm, Ankylos
	6803-08	Sechskant SW 1,2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I
	6803-09	Sechskant SW 1,8 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 26 mm, Ankylos

ALLE HANDELSMARKEN SIND DAS EIGENTUM DER JEWELIGEN FIRMEN. Für Abweichungen aufgrund implantatseitiger Toleranzen können wir keine Gewährleistung übernehmen!
ALL TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THE RESPECTIVE COMPANIES. For deviations due to implant's tolerances we can't take any guarantee.



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

230

