

xantasil®

Information produit



xantasil® Substitut à l'alginate
Son confort impressionne.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



KULZER

MITSUI CHEMICALS GROUP

xantasil[®], substitut à l'alginate

Son confort impressionne

En matière de soins dentaires, il y a de nombreuses choses à faire chaque jour. Il s'agit de planifier à l'avance et d'organiser vos habitudes de travail aussi simplement et efficacement que possible. C'est ce dont nous nous occupons pour vous, et cela inclut le domaine des empreintes dentaires.

Spécialement conçu pour répondre aux exigences des empreintes anatomiques, xantasil[®] est un matériau d'empreinte de Kulzer de viscosité medium qui procure un meilleur confort de manipulation et une grande stabilité dimensionnelle. Vous obtenez ainsi des empreintes fiables – sans complication, proprement.

Avons-nous déjà remarqué que même la collaboration avec le laboratoire est plus facile ? Au cas où il y ait un retard, vous bénéficiez de la stabilité dimensionnelle de xantasil. L'empreinte conservera son état pendant plusieurs semaines.

Facile d'emploi, facile à conserver:
économisez vos forces et votre temps grâce à xantasil[®], l'ingénieux substitut aux alginates traditionnels.

Ce dont vous avez besoin pour les empreintes anatomiques

xantasil couvre toutes les indications des empreintes anatomiques pour lesquelles on utilise habituellement les alginates, comme par exemple la réalisation de provisoires, les modèles d'ODF, les modèles antagonistes, les attelles.

Prenez des empreintes qui se conservent: xantasil[®] procure une stabilité dimensionnelle nettement supérieure.



Mesure du moule étalon utilisé pour le test.



Mesure de la rétraction de xantasil[®] après plusieurs semaines.



Mesure de la rétraction d'un alginate concurrent après 24 heures.



Les avantages de xantasil®

Stabilité dimensionnelle de longue durée

- Plus de flexibilité et de commodité pour la coulée des modèles, sans se précipiter
- Apte à un traitement différé sans perte de précision
- Permet d'obtenir plusieurs modèles à partir d'une même empreinte
- Plus précis que les alginates
- Conservation possible sur une longue période

Mélange automatique

- Excellente qualité de mélange, homogène et sans bulles
- Manipulation propre, hygiénique, pas de bol ni de spatule à nettoyer
- Matériau prêt à l'emploi, gain de temps et d'efforts par rapport aux alginates
- Moins de perte : extrusion de la quantité nécessaire et suffisante de matériau

Désinfection facile

- Simple et complète, sans risque de gonflement du matériau
- Peu d'étapes de traitement, ce qui réduit le nettoyage au minimum

Excellente qualité de surface

- Pour une compatibilité optimale avec le plâtre
- Moins de retouches de meulage et de polissage lors de la confection de provisoires

Dureté finale peu élevée, bonne mémoire élastique

- Facile à meuler, si nécessaire
- Facile à désinsérer de la bouche du patient
- Démoulage aisé des modèles


xantasil Dynamix Fast Set

Inclus:
3 x (2 x 380 ml)
2 embouts mélangeurs
Dynamix
1 bague de fixation
Dynamix
Réf: 66052101

xantasil Fast Set

Inclus :
6 x 50 ml
6 embouts mélangeurs verts
Réf. 66052102

- L'alternative rapide et pratique :
Les utilisateurs de la machine de mélange Dynamix speed ont appris à apprécier l'alternative rapide, pratique et hygiénique du mélange automatique.

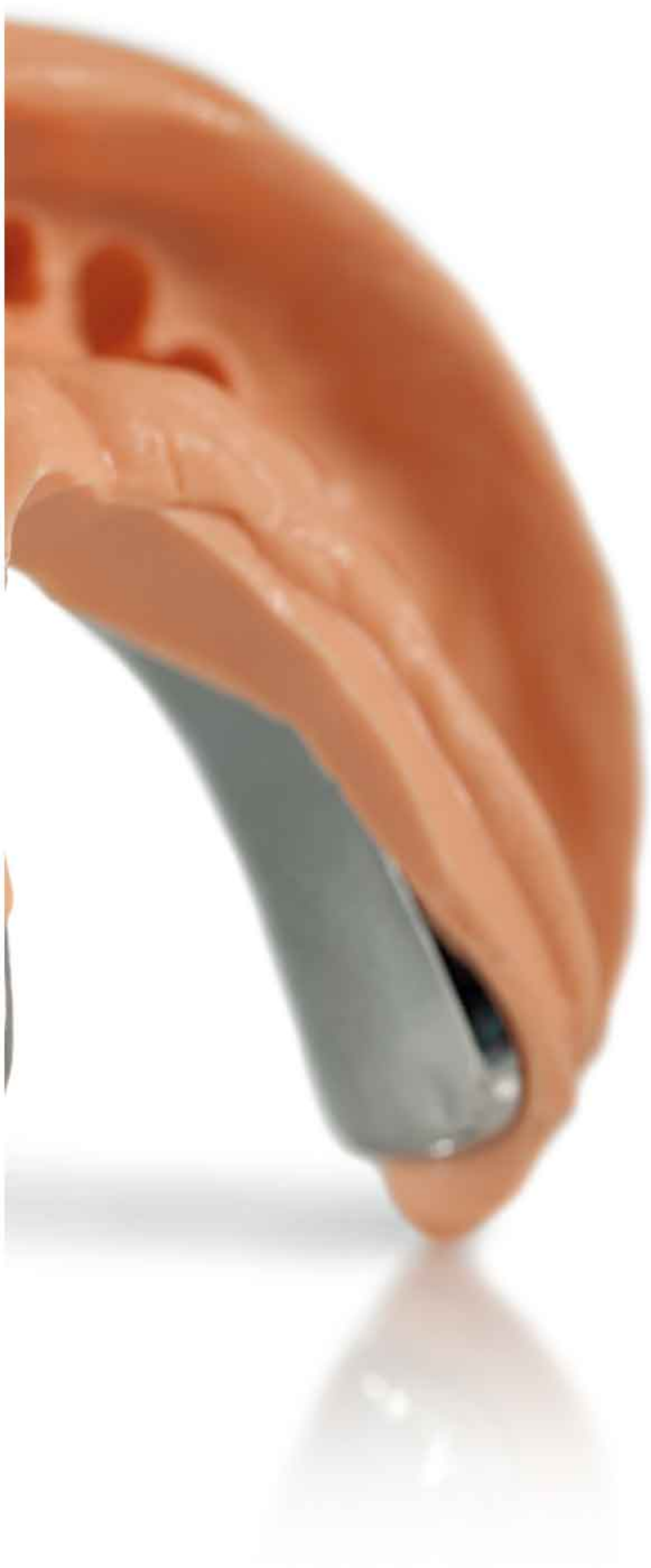

Kulzer France
Les Conquérants - Bât. Everest
1 avenue de l'Atlantique 91976
Les Ulis
ZA Courtaboeuf Cedex Tél : 01
69 18 48 85 Email :
dentaire@kulzer-dental.com

kulzer.fr